


保証書別添

シャワートイレ付
ポータブルトイレ

CWA-202

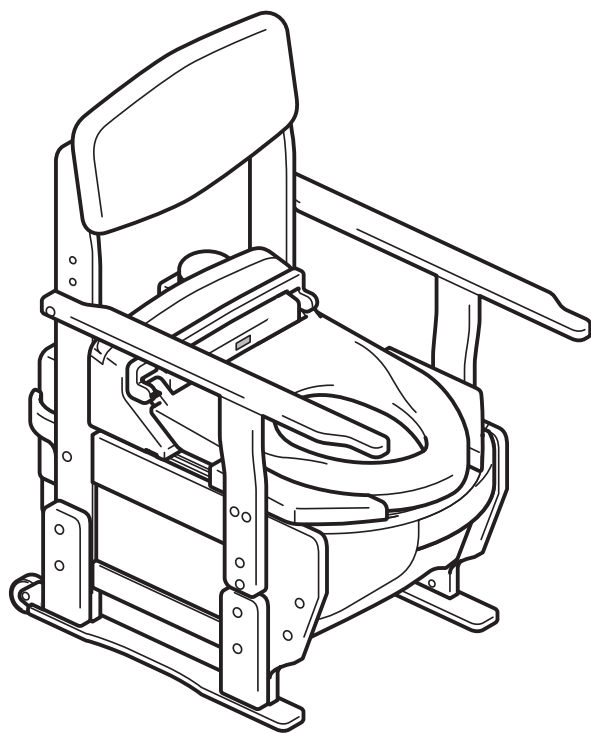

説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、
当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

工事店様へのお願い

貴店名ならびに取付日を同梱の保証書にご記入の上、お客さまに必ずお渡ししてください。

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。

ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。介護する方もこの説明書をお読みください。

お読みになった後もすぐ取り出せる場所に、大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意	1
お取り扱い上の注意	4
特長	5
部品の確認	7
各部のなまえ	8
お使いになる前の準備	
●椅子の高さ調節	11
●付属品の取り付け	11
●移動・設置のしかた	15
ご使用方法	
●ポータブルトイレの使用方法	16
●汚物の処理方法	18
●シャワートイレの使用方法	19
使用前の準備	19
電源・便座・温水スイッチの使いかた	22
おしり洗浄、ビデ洗浄のしかた	23
マッサージ洗浄のしかた	24
脱臭のしかた	24
節電のしかた	24
より快適な機能	25
知っておいていただきたいこと	27
●椅子としての使用方法	29
お手入れの方法	
●日頃のお手入れ	30
●隠れた部分のお手入れ(バケツ・給水タンク・便座ストッパー)...	31
●シャワートイレのお手入れ(ノズル・ストレーナー・脱臭カートリッジ)...	36
●リモコンの電池交換	38
長期間使用しない場合	39
故障かなと思ったら	41
アフターサービス	43
仕様	45
別売品のご案内	46

安全上のご注意（必ずお守りください。）

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

- 警告** …… 「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」
- 注意** …… 「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」
-  …… 「注意しなさい！」（上記の『警告』、『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）
-  …… この表示は、してはいけない「禁止」の記号です。
禁止
-  …… この表示は、必ず実行していただく「強制」の記号です。
指示実行

警告

- 長時間使用するときは、便座温度を「切」にしてください。 指示実行
 - 次のような方が使用されるときには、周りの方が便座温度を「切」にしてください。
〔お子様、お年寄り、病気の方、ご自分で温度調節のできない方、皮膚の弱い方、睡眠薬など眠気を誘う薬を服用された方、深酒、疲労の激しい方〕
- ※「切」以外の温度で長時間使用されますと、低温ヤケドをおこす恐れがあります。

80kgを超える体重の方は使用しないでください。



禁止

※転倒、破損し、ケガをする恐れがあります。

椅子にがたつきがある状態で使用しないでください。



禁止

※転倒、破損し、ケガをする恐れがあります。

椅子の上に重いものを乗せたり、踏み台として使用しないでください。



禁止

※転倒、破損し、ケガをする恐れがあります。

人を乗せた状態で、持ち上げたり移動させたりしないでください。



禁止

※転倒、破損し、ケガをする恐れがあります。

警告

確実にアース線をアースターミナルに接続してください。



アース接続

※接続しなかったり、不適切な接続では、感電・火災の原因になります。

※コンセントにアースターミナルがない場合は、電気工事店にご相談ください。

歩行、立ち座りに介助が必要な方は1人で使用しないでください。



禁止

※転倒し、ケガをする恐れがあります。

背シート、ペーパーホルダーを手すりとして使用しないでください。



禁止

※転倒し、ケガをする恐れがあります。

ボルトを締め付ける際、付属の六角レンチでしっかり固定してください。



指示実行

※転倒、破損し、ケガをする恐れがあります。

座った状態で、背シートにむやみに体重をかけないでください。



禁止

※転倒、横滑り、破損し、ケガをする恐れがあります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。



禁止

※感電し、ケガをする恐れがあります。

バスルームなど湿気の多い場所には設置しないでください。



水場使用禁止

※感電・火災の原因になります。



電池を取り扱うときは、以下の事はしないでください。



禁止

●金属製のもの（ネックレス・ヘアピン等）と一緒に持ち込んだり保管しないでください。

●新しい電池と古い電池や種類の異なる電池を一緒に使用しないでください。

●過熱・分解したり、水や火の中に入れたりしないでください。

※電池の液もれにより火災の原因となります。

電池は以下の事を守り、正しく使用してください。



指示実行

● $\oplus$ $\ominus$ を正しく入れてください。

●長期間使用しないときは、電池を取り出してください。

●使い切った電池はすぐに器具から取り出してください。

※電池の液もれにより火災の原因となります。

●電池を破棄する時は、テープなどで絶縁をおこなってください。

※電池の液もれにより火災の原因となります。

●乳幼児の手の届く場所には置かないでください。

※誤って飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

●電池液が身体に付着したときは、水でよく洗い流してください。

●液が目に入ったときは、目をこすらずにすぐにきれいな水で洗ってください。

※失明の恐れがあります。医師に相談してください。


警告

ACアダプター、アース線、シャワートイレ電源線を束ね、じゃまにならないように配線してください。


※足を引っ掛けての転倒や、破損原因になる恐れがあります。



ケーブル
クランプ

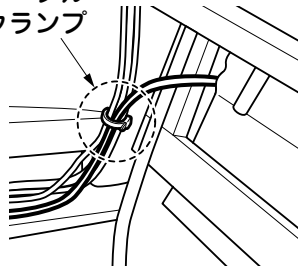

いす内部の束ね方

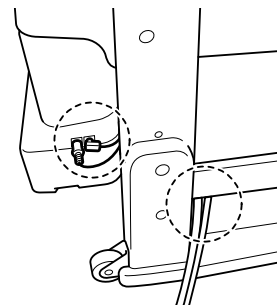

いす外部の配線例

注意

プラスチック部のお手入れには、便座に使用できる洗剤以外(トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、クレンザー、クレゾール)は使用しないでください。

※プラスチック部が割れてケガの原因になります。

※感電・火災の原因になります。



禁止

自分で操作できない方には使用させないでください。

※思わぬ事故の原因になります。



禁止

給水ホースを折り曲げたり、つぶしたりしないでください。

※漏水し室内浸水の原因になります。



禁止

長期間使用しない場合は、水抜き操作を行い、電源プラグをコンセントから抜いてください。
(37ページ参照)

※凍結破損により火災・室内浸水の原因になります。
※水が汚れて皮膚の炎症などを起こす原因になります。



指示実行

脱臭カートリッジ取付口の奥に指を入れないでください。

※ケガの原因になります。



禁止

タバコや灰皿などの火気類を近づけないでください。

※火災の原因になります。



火気禁止

給水タンクにお湯・消毒液・薬品等を入れないでください。

※皮膚の炎症、やけどや、給水タンクの変形・破損の原因になり、ケガをする恐れがあります。



禁止

定期的に配管の周りを見て水漏れがないか確認してください。

※部品の劣化・摩耗などになる水漏れが発見できず、家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります。



指示実行

持ち上げる際、必ず椅子本体を持ち、便座を持たないでください。

※破損し、ケガをする恐れがあります。




禁止

お取り扱い上の注意

故障を起こさないために守ってください。


ストーブやヒーターなどを近付けすぎないでください。

※変色や故障の原因になります。

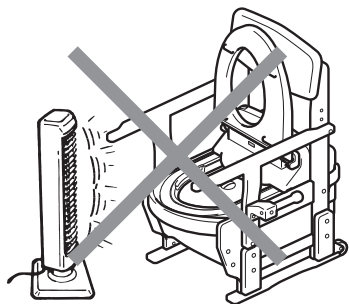

リモコンに水や洗剤をかけないでください。

※故障の原因となることがあります。

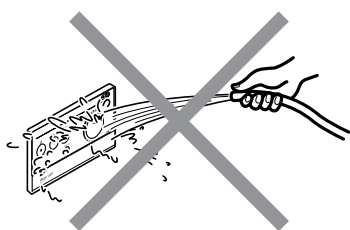


プラスチック部にトイレ用消臭剤をかけないように注意してください。

かかった場合は、すぐにふき取ってください。
※光沢がなくなることがあります。

ぬれた手でリモコンを操作しないでください。

※故障の原因になります。

直射日光が当たらないようにしてください。
※プラスチック部が変色することがあります。

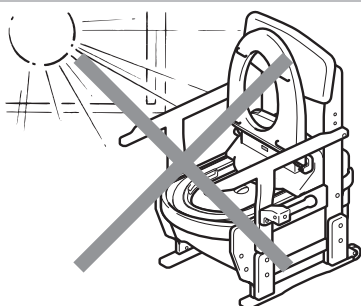

シャワートイレ本体・便座などのプラスチック部を乾いた布やトイレットペーパーなどでふかないでください。

※傷つきの原因になります。

(P.30ページ)

便座の開閉は乱暴に行わないでください。

※割れたり漏電など故障の原因となることがあります。



不適切な便フタカバー・便座カバーを取り付けないでください。


※ 他社市販品のご使用にあたっては、当社では責任を負いかねます。お客さまの責任でご判断ください。

※ 便座カバーのボタン部と便器とがぶつかり、便座が割れる場合があります。

※ 着座センサーにカバーが掛かり、着座センサーが入りっぱなしになります。


これにより脱臭ファンが回りっぱなしになったり、便座が冷たくなることがあります。

※ カバー類をまき込み、便フタが開ききらず倒れてくる場合があります。

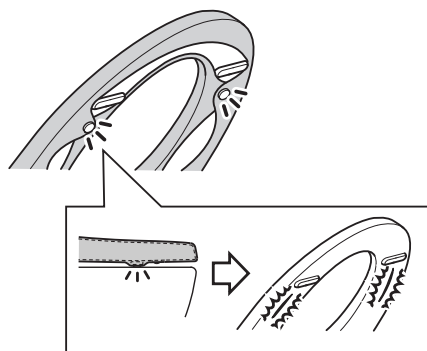


「せめてこのくらいは自分で。」 そんな想いをかなえるポータブルトイレ。

ベッド～トイレ間が、 移乗しやすいフラット設計

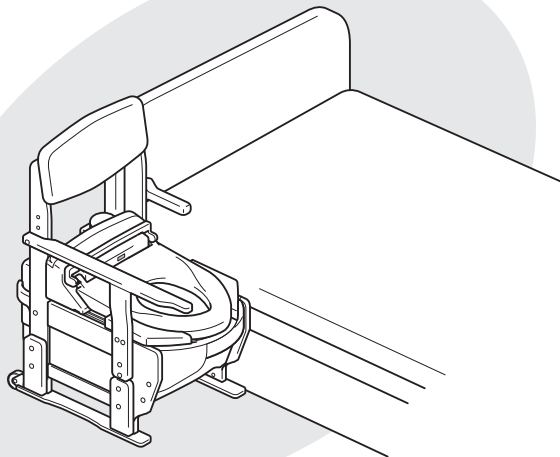


便座と本体木部間に隙間がなく、シャワートイレ本体に操作部がないため、マットレス面から便座までがフラットになり座位での移乗が容易に行えます。さらに、サイドレール差込口がマットレス端面より出ていないベッドと組み合わせると、移乗がより楽になります。

バケツトレイ+バケツの 二重構造でいつも清潔

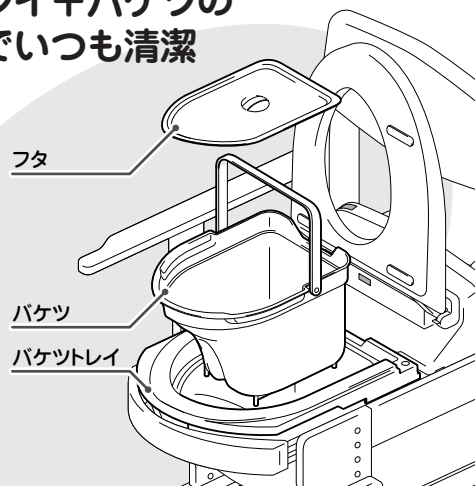

安心の二重バケツで、万が一の漏れもバケツトレイがしっかりキャッチ。バケツも簡単に取り出せて洗えます。しかも汚れがつきにくい樹脂製でいつも清潔です。

立ち上がりやすい足元形状

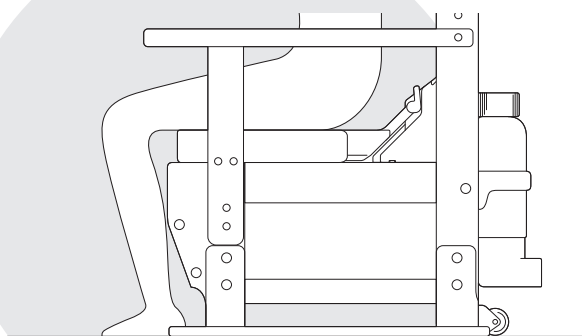

蹴込み部分が深く、立ち上がりが楽にできます。

肘掛け取り外し



肘掛けの取り外しができ(左右取り外し可能)、座位移乗がスムーズに行えます。また、取り外した肘掛けの代わりに「ミニグリップ」を付けることができ、座位移乗の際の手をつく場所を確保することができます。


MEMO

部品の確認


同梱部品

箱を開けたら部品がそろっているか確認してください。不足の時や破損の場合は、販売店にご連絡ください。

本 体

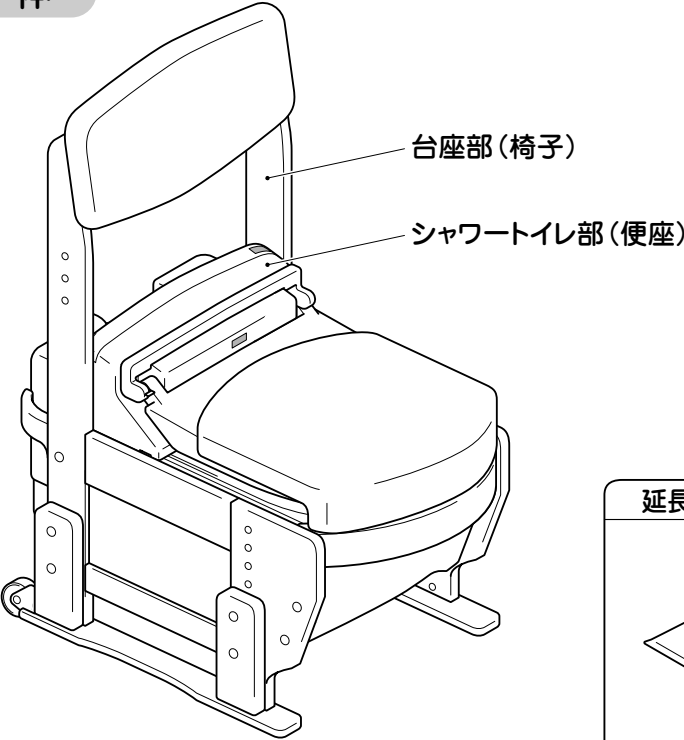








延長コードセット (シャワートイレ用)

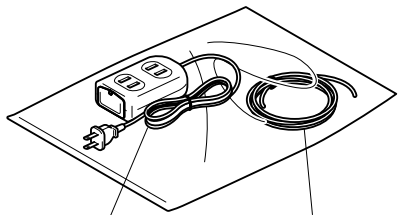

延長アース線 1本


テーブルタップ 1個

付属品

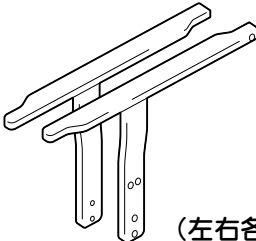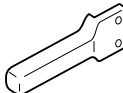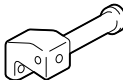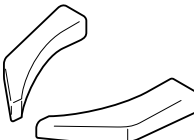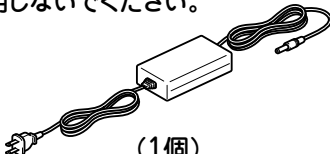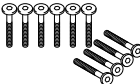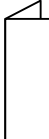
肘掛け		ミニグリップ		ペーパーホルダー	
					
(左右各1本)		(1本)		(1本)	
便座補助プレート		ACアダプター付き電源コード [*] (給水タンク用)		リモコン+電池	
		※この製品以外には 使用しないでください。 		 (リモコン1個、 電池2個)	
(左右各1個)		(1個)		面ファスナーテープ	
				 (硬2枚、柔1枚)	
センサー作動停止布		ボルト		六角レンチ	
					
(1枚)		(10本)		(1本)	
				取扱説明書	
					
				(1冊)	
				保証書	
					
				(1部)	

各部のなまえ

全体図

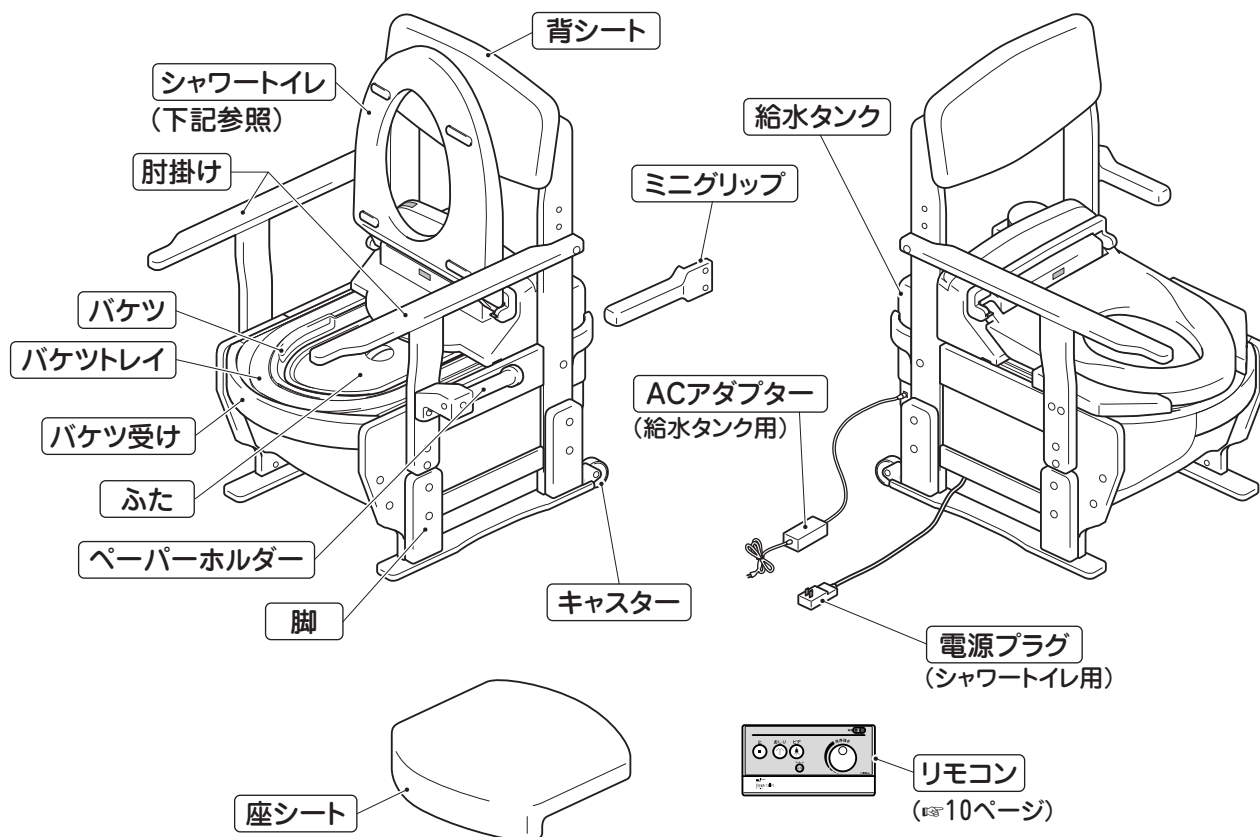


シャワートイレ

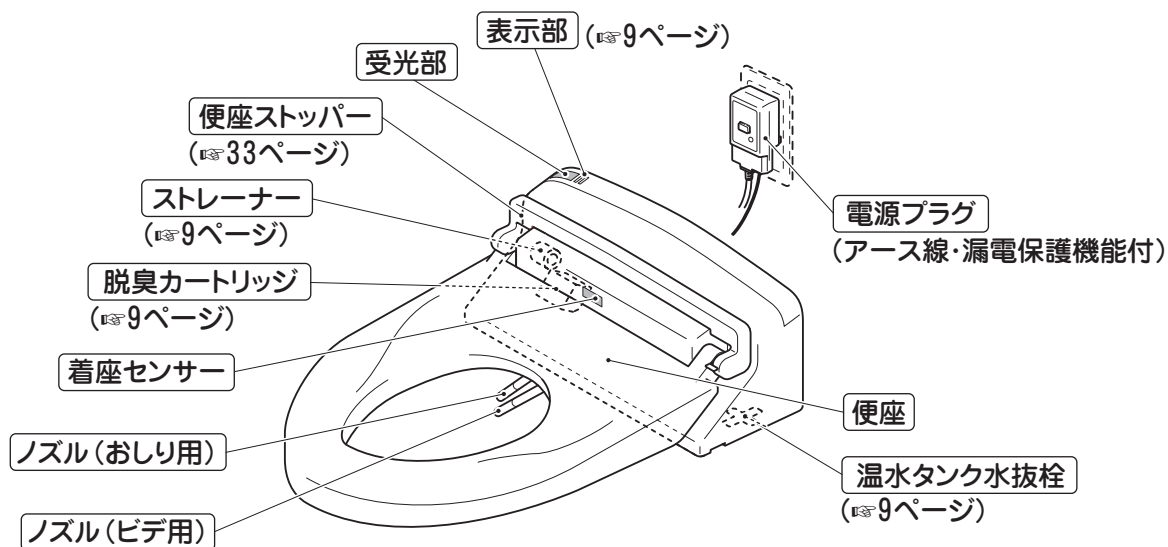


ストレーナー

〈シャワートイレ 左側面〉

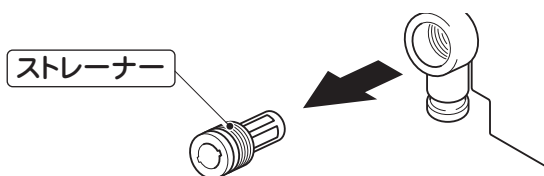

※給水タンク内水の異物を除去します。
(☞36ページ)


〈ホータブルトイレ背面 給水タンク〉

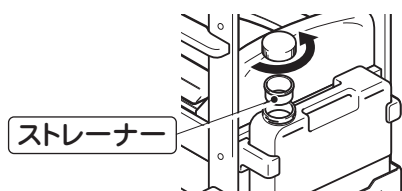

※給水タンクに入れる水道水の異物を
除去します。(☞36ページ)

脱臭カートリッジ


〈シャワートイレ 裏面〉

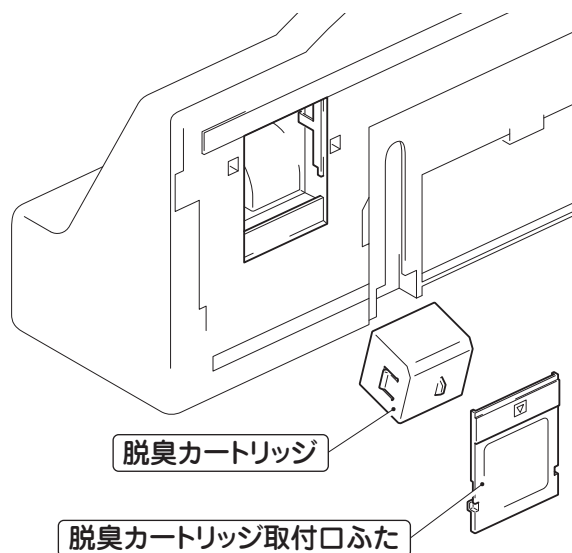


※脱臭カートリッジのお手入れ、交換を
するときに外します。(☞37ページ)

表示部

〈シャワートイレ 表面〉

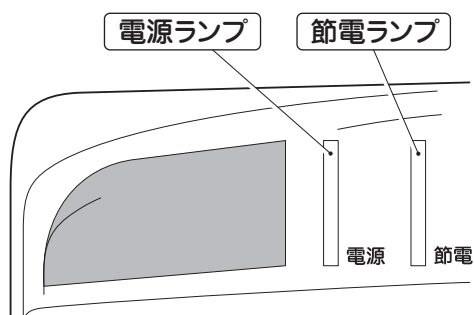


〈シャワートイレ 裏面〉

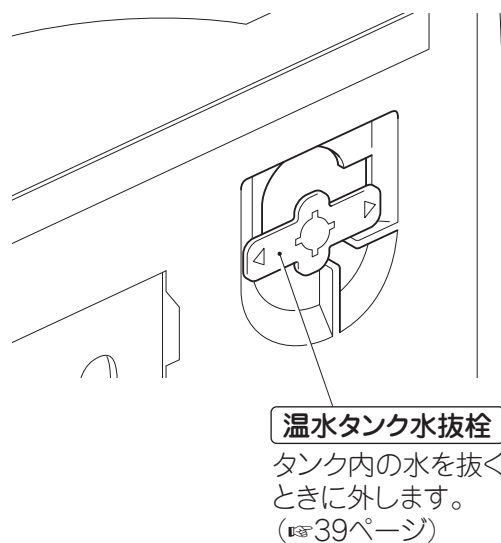

温水タンク水抜栓
タンク内の水を抜く
ときに外します。
(☞39ページ)

※左右表記は、ポータブルトイレに向かって見た場合です。

リモコン

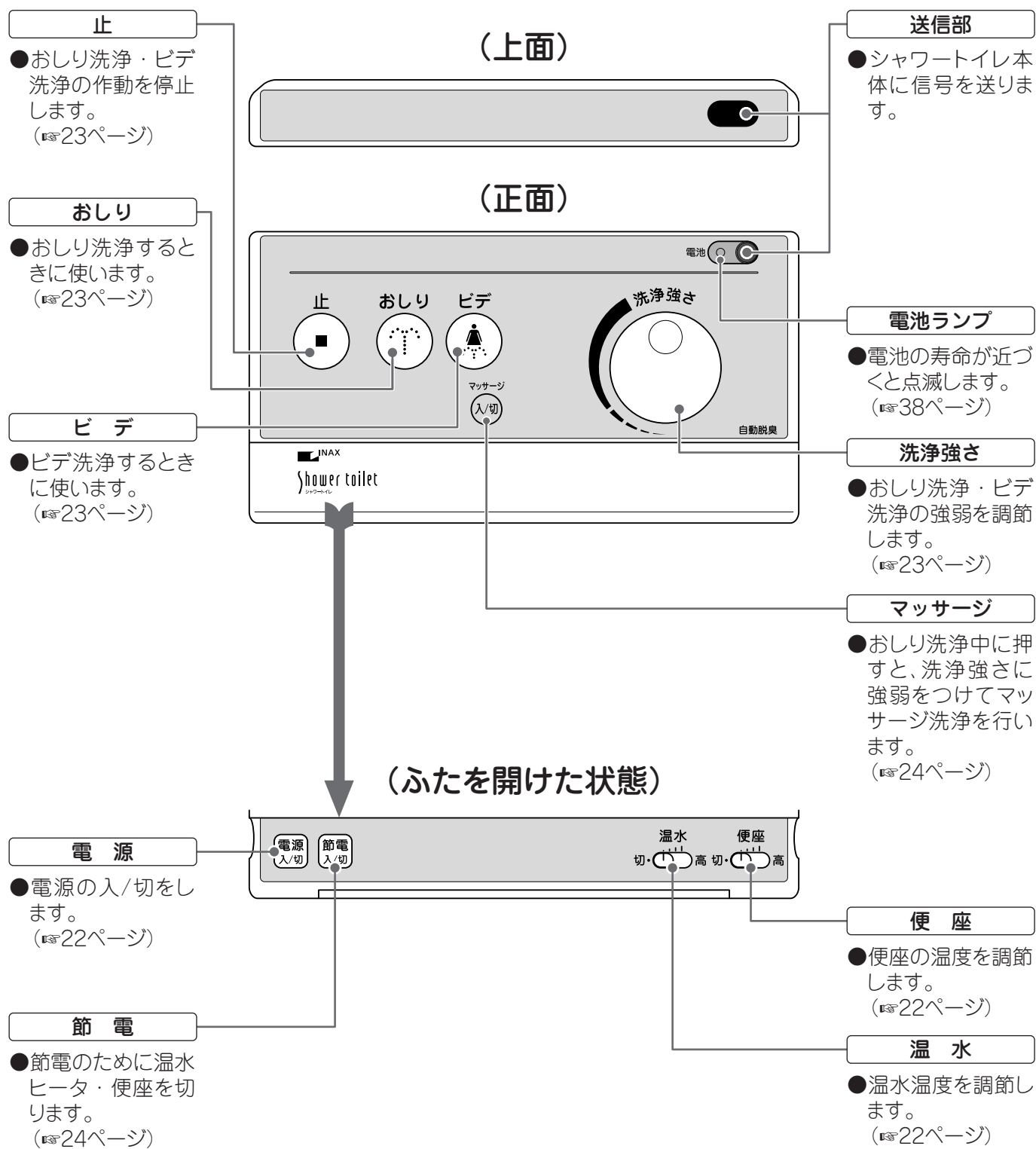

注意

- リモコンを手にとって使用する場合は、リモコンの送信部（黒い部分）をシャワートイレ本体の受光部（黒い部分、P8ページ）に向けて操作してください。

お使いになる前の準備

椅子の高さ調節


床から便座までの高さを 3 段階

(350・380・410mm) に調節できます。


※出荷時は、350mmに調節されています。

注意

- ご購入店にご相談のうえ、体にあった高さの調節を行ってください。

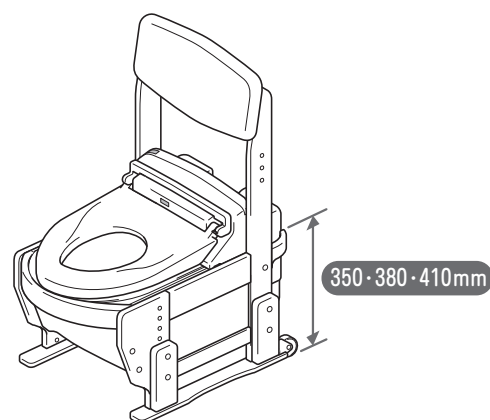

- 1 左右のボルト各 4 本を、付属の六角レンチを使って外し、脚を取り外す。
- 2 脚の高さを決め、左右のボルト各 4 本で固定する。

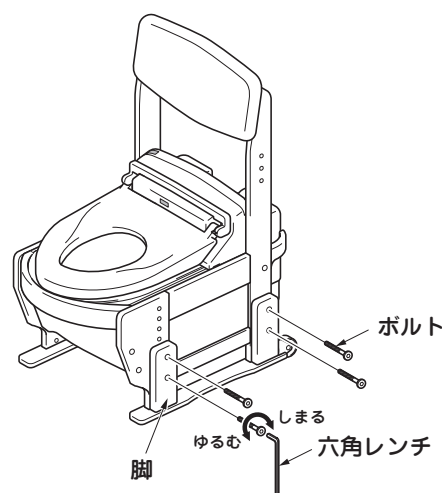

付属品の取り付け


注意

- ボルトは六角レンチでしっかり締め付けてください。定期的にボルトの緩みがないか確認してください。
※緩んでいる場合、しっかり締め付けなおしてください。

■ 肘掛けの取り付け

肘掛けは、便座からの高さを 3 段階 (190・220・250mm) に調節できます。

- 1 取り付ける高さを決める。
- 2 付属のボルト 6 本 (片側 3 本) と六角レンチを使って固定する。

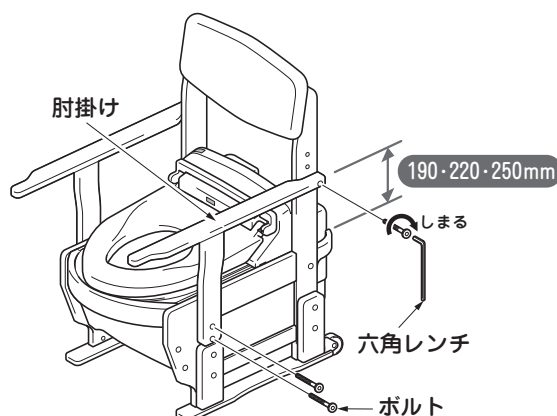


■ ミニグリップの取り付け

必要に応じて、左右いずれかにミニグリップを取り付けることができます。
ミニグリップは、便座からの高さを2段階(205・235mm)に調節できます。

- 1 取り付ける位置と高さを決める。
- 2 付属のボルト2本と六角レンチを使って固定する。

アドバイス


- ベッドから座位移乗して使用する際便利です。

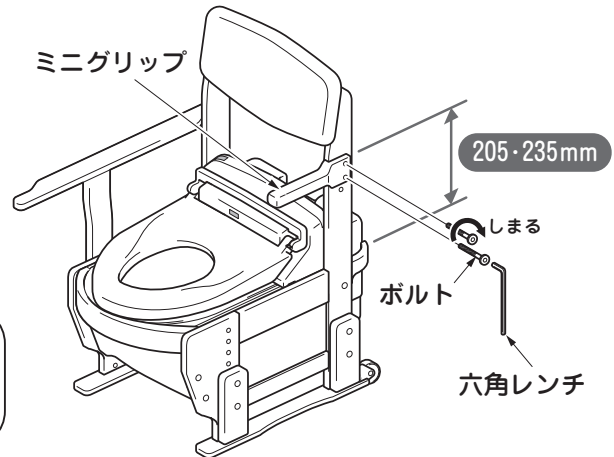


■ ペーパーホルダーの取り付け

必要に応じて、左右いずれかに取り付けることができます。

- 1 取り付ける位置と向きを決める。
- 2 付属のボルト2本と六角レンチを使って固定する。

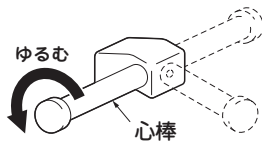


※心棒は、左側に回すとゆるみますので、前・後・横のお好みの位置に取り付けてください。

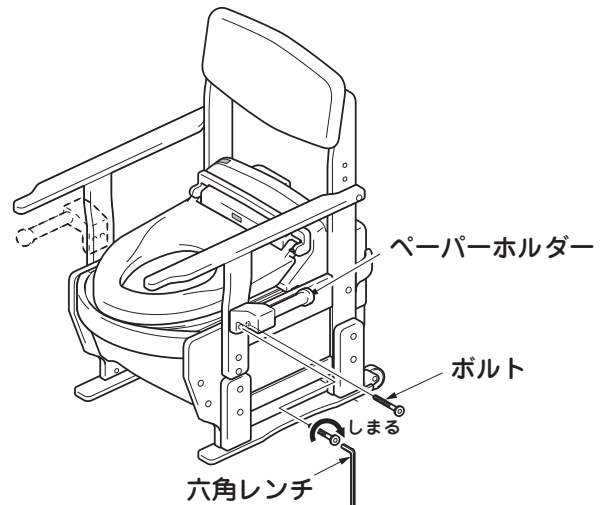

■ リモコンに電池を入れる

リモコンに付属の電池を入れてください。

- 1 リモコン裏側の電池カバーを外す。
- 2 電池の $\oplus$ $\ominus$ を合わせ、電池を入れる。
- 3 電池カバーを取り付ける。


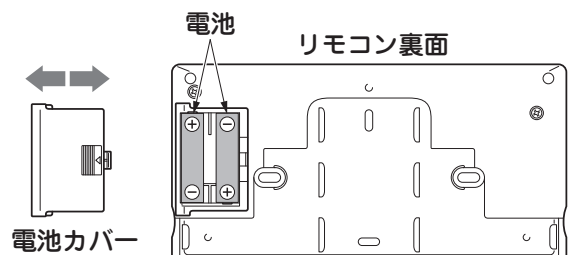


■ リモコンの取り付け

リモコンは付属の面ファスナーテープを使って椅子に取り付けることができます。必要に応じて、取り付けてください。

- 1 面ファスナーテープの柔をリモコンの裏側に貼る。
- 2 リモコンを取り付ける位置に面ファスナーテープの硬を貼る。
- 3 面ファスナーテープを合わせて、リモコンを取り付ける

〈取り付け例〉

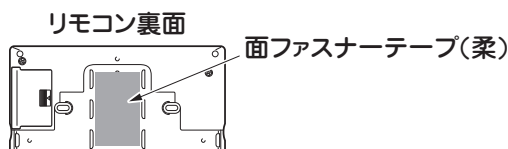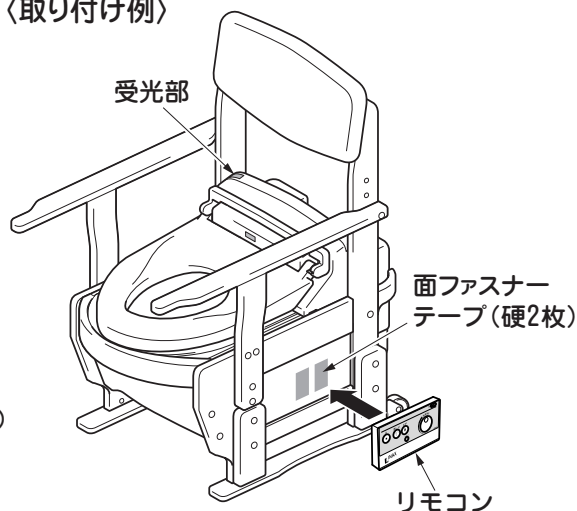

注意


- リモコンをファスナーテープで壁に固定しないでください。壁から外れて破損する恐れがあります。
- リモコンを手にとって使用する場合は、リモコンの送信部（黒い部分、10ページ）を、シャワートイレ本体の受光部（黒い部分）に向けて操作してください。

リモコンは壁に取り付けることも可能です。別売の取付ねじセット〔品番：7A-5790Z、木ねじ(M4×35)とアンカー〕を手配して、ブラケットを壁の材質に合わせて取り付けます。

(1) ブラケットを壁の材質に合わせた施工方法で、取付位置に取り付けます。


● 厚みが5mm以上の合板壁の場合

ブラケットを付属の木ねじでしっかりと固定します。

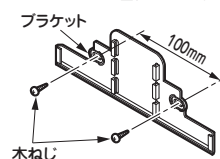


● 厚みが5mm以下の合板壁および石膏ボード壁の場合

- ① 直径6mmの下穴をあけます。(石膏ボードは5mm)
- ② ハンマー等を使って、付属のプラスチックアンカーを軽く打ち込みます。
- ③ ブラケットを木ねじでしっかりと固定します。締め付けていくとはじめは堅く、いったんゆるくなって再び堅くなります。

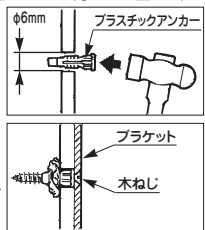


● コンクリートの場合

- ① 直径6mm、深さ約33mmの下穴をあけます。
- ② ハンマー等を使って、付属のプラスチックアンカーを軽く打ち込みます。
- ③ ブラケットを木ねじでしっかりと固定します。

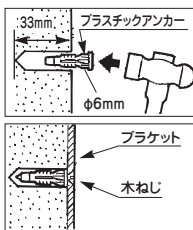

(2) リモコンをブラケットの上に合わせ、下へ押し下げてリモコンを取り付けます。

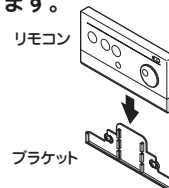


■ 便座補助プレートの取り付け

必要に応じて、便座先端側に便座補助プレートを取り付けることができます。座位移乗する場合、隙間がなくなって便利です。

- 1 便座補助プレートを図のように椅子本体と便座の間に入れる。

※便座補助プレートには、左右があります。


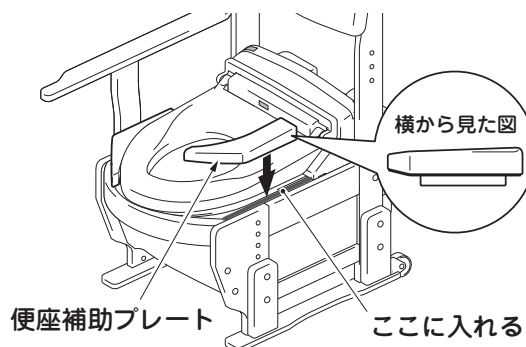


■ センサー作動停止布の貼り付け


センサー作動停止布を座シートの後側に貼ることで、座シートを便座の上にセットしたとき、着座センサーの作動を止めることができます。

※センサー作動防止布を貼らない場合、着座センサーが作動し、脱臭が動き始めます。

1 センサー作動停止布の裏紙をはがし、座シート後側の中央部に貼る。

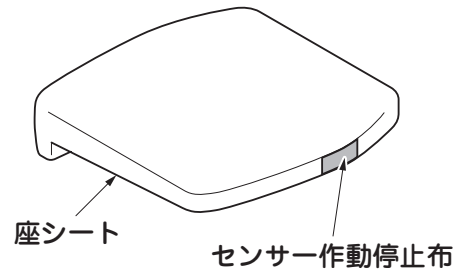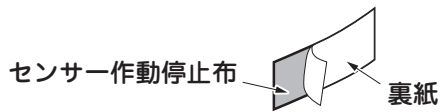

※幅方向は座シート中央、上下方向はシート折り返し部に合わせスキマがないように貼り付けてください。

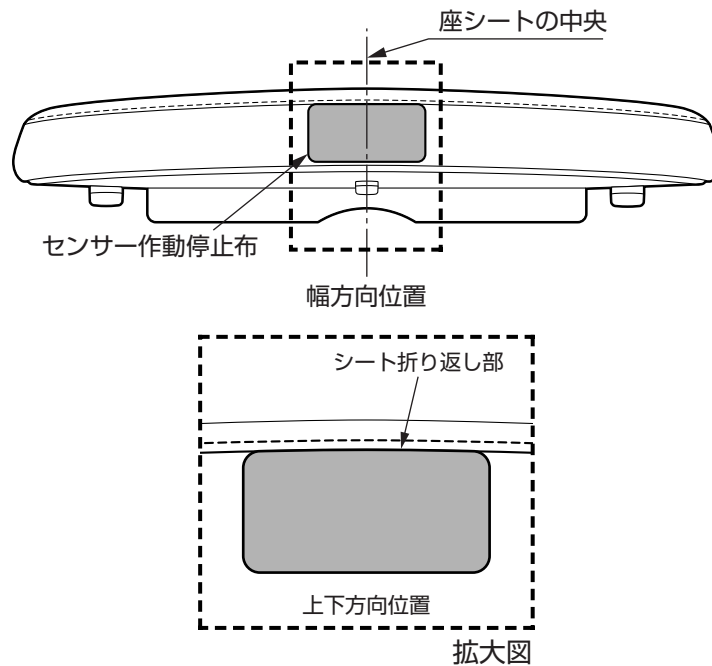

指示実行

着座時には着座センサーが作動し、脱臭機能等が作動する場合があります。

移動・設置のしかた


ポータブルトイレを移動するときは、肘掛けの先端を両手で持ち上げ、キャスターを使って移動してください。

注意

- 持ちあげすぎないでください。
反対側に倒れて、破損したり、椅子の角が当たって床面を傷つける恐れがあります。

注意

- 移動する際、バケツ内の汚物や水を事前に処理してください。
※床を汚す恐れがあります。

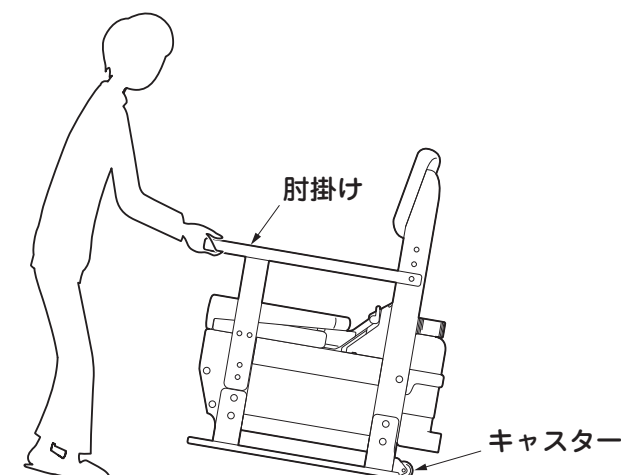

設置にあたっては、次の点にご注意ください。

- 水平で平坦な場所に設置してください。
- 設置場所がたたみやカーペットなどやわらかい材質の場合、脚跡やキズができることがあります。
必要に応じて、脚の下に受け板を敷かれることをおすすめします。

⚠ 警告

必ず平坦な場所に設置する。

転倒、横滑り、破損し、ケガをする恐れがあります。



指示実行

⚠ 警告

アース線を取り付ける。

故障や漏電時に感電の原因になります。
※コンセントにアース端子がない場合、
電気工事店にご相談ください。



指示実行

注意

- 受け板を敷いた場合は、製品が水平に保たれ、がたつきがないようにしてください。


- 湿気の多い場所、直射日光の当たる場所への設置は避けてください。
サビやカビの発生、変色、変形の原因になります。
- アース線を取り付けてください。
※コンセントにアース端子がない場合は、電気工事店にご相談ください。

ご使用方法

ポータブルトイレの使用方法


1 座シートを外す。

※便座補助プレートを取り付けている場合は、外してください。

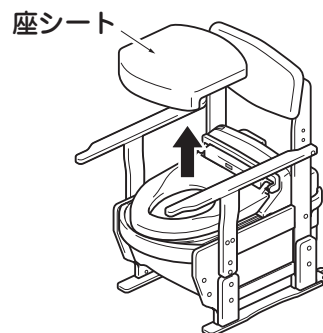


2 バケツのふたを外す。

※外したふたは、本体後側のポケットに入れてください。

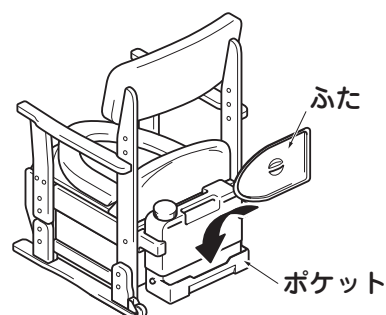

3 便座を上げる。

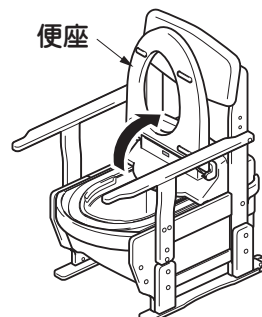


4 バケツ受けを手前に引き出して、バケツを取り出し、底から5 cm程度水を入れる。

アドバイス


- バケツに市販のポータブルトイレ用消臭剤などを入れると、消臭効果があります。
- バケツにトイレットペーパーを折りたたんで入れておくと、汚物をすてる時バケツの汚れが少なくなります。

注意

- バケツ受けを引き出した状態で、便座を下さないでください。
※破損、故障の原因になります。

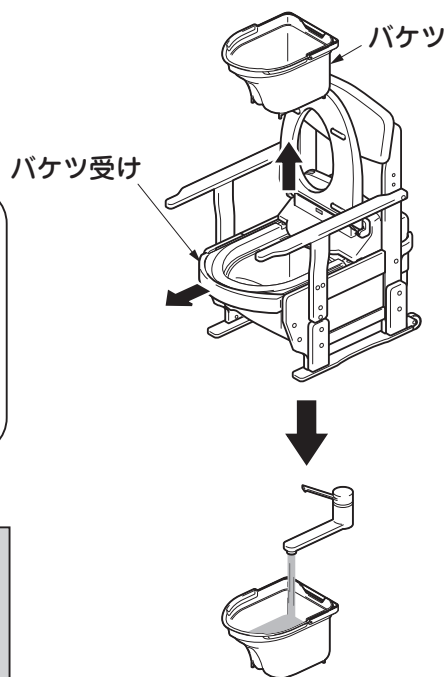


5 バケツをバケツトレイに戻し、バケツ受けを後方に押して元に戻す。

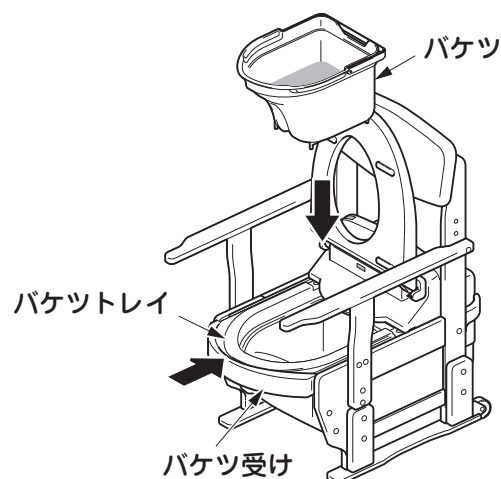


6 便座を下げる。

※便座は、スローダウン機構が付いているので、ゆっくり下がります。

※便座補助プレートをお使いになる場合は、取り付けてください。(P.13ページ)

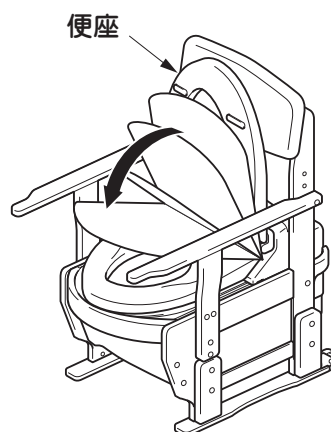

7 便座に座る。

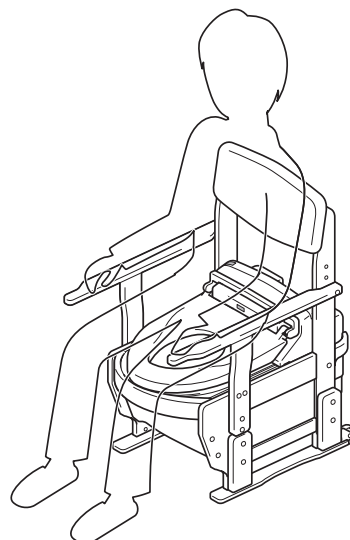

⚠ 警告

座った状態で、背シートにむやみに体重をかけないでください。




禁止

転倒、横滑り、破損し、ケガをする恐れがあります。

注意

- 男子小用の際、立ったままで使用しないでください。
※床を汚す恐れがあります。
- 使用上限ラインより下でお使いください。
- 使用後、においが気になる場合はふたをお使いください。

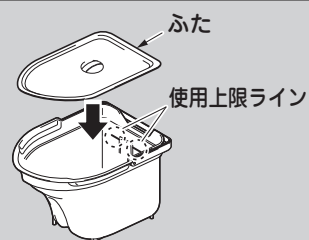

汚物の処理方法

汚物は、こまめに処理することをおすすめします。

※便座補助プレートを取り付けている場合は、はじめに外してください。


- 1 便座を上げる。
- 2 バケツ受けを手前に引き出す。
- 3 バケツにふたをかぶせ、取っ手を持ってバケツを取り出す。
- 4 バケツ受けを後方に押し、元の位置に戻す。
※バケツ受けを手前に引き出したままにするとノズルおよびシャワートイレの裏面に付着していた水滴が落ち、床を濡らす場合があります。
- 5 ふたを外し、汚物をトイレに流す。
- 6 バケツに底から5 cm程度、水を入れる。
バケツ受けを引き出し、バケツトレイにバケツを戻す。

アドバイス

- バケツに市販のポータブルトイレ用消臭剤などを入れると、消臭効果があります。
- バケツにトイレットペーパーを折りたたんで入れておくと、汚物をすてる時バケツの汚れが少なくなります。

注意

- バケツ受けを引き出した状態で、便座を下げないでください。
※破損、故障の原因になります。

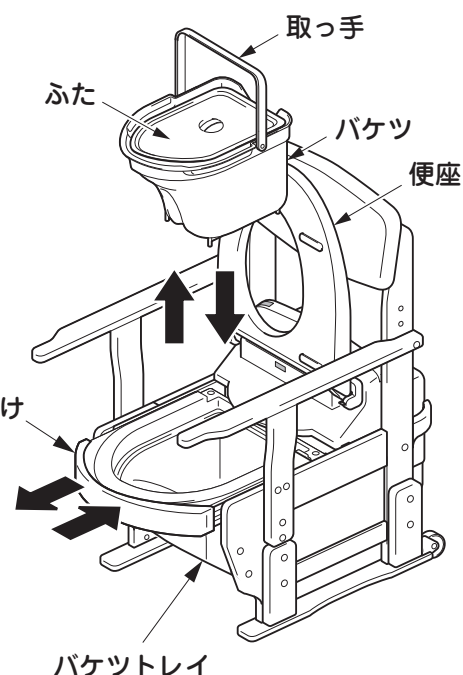

- 7 バケツ受けを後方に押し、元に戻す。
- 8 便座を下げる。

※便座は、スローダウン機構が付いているので、ゆっくり下がります。

シャワートイレの使用方法

使用前の準備

シャワートイレを使用される前に、次の要領で準備を行ってください。


1 給水タンクのキャップを外し、水を満水ラインまで入れる。

※給水タンクの容量は、約5リットルです。

※水道水を入れてください。

※給水タンクの水は、1日1回取りかえてください。

(※40ページ)

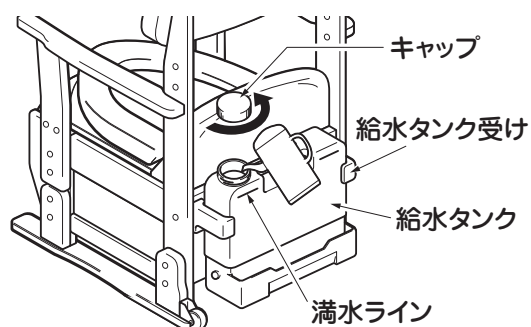

⚠ 警告

給水タンク受けを付けた状態で給水タンクを持ち上げない。



指示実行

※給水タンク受けを付けた状態で給水タンクを持ち上げると、漏水、破損の原因になる恐れがあります。

2 ACアダプターコネクタをいすの内側に通し給水タンクに差し込む。



⚠ 警告

ACアダプター、アース線、シャワートイレ電源線を束ね、じゃまにならないように配線する。




指示実行

※足を引っ掛けての転倒や、破損原因になる恐れがあります。

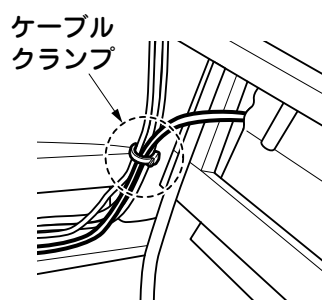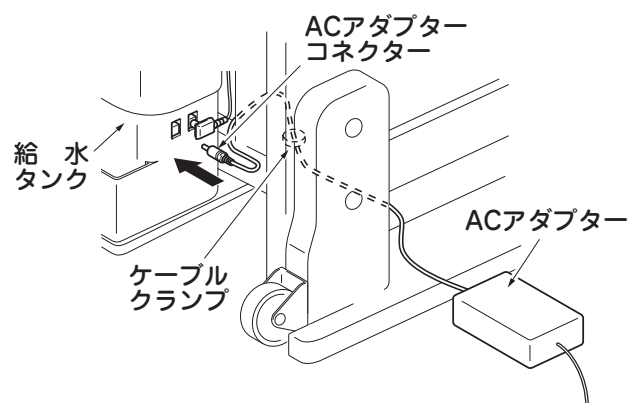

いす内部の束ね方

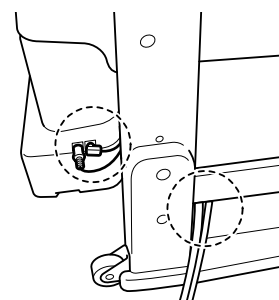

いす外部の配線例

3 シャワートイレ用電源を接続する。

※必要に応じて、延長コードと延長アース線をお使いください。

⚠ 警告

延長アース線を取り付けは、
電気工事店にご依頼ください。




故障や漏電時に感電の原因になります。


1. アース線を接続します。

2. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

※電源プラグを差し直す時は、10秒程度時間をあけてください。

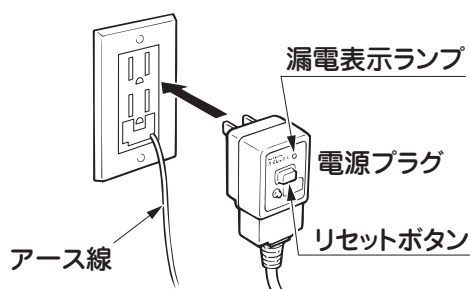

※電源プラグをコンセントに差し込むと、自動的に電源は「入」の状態になり本体の電源ランプが点灯します。

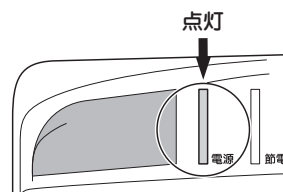

注意

- 電源ランプが点灯しない場合は、電源プラグのリセットボタンを押して、電源ランプが点灯することを確認してください。

⚠ 警告

確実にアース線をアースターミナルに接続してください。

※接続しなかったり、不適切な接続では、感電・火災の原因になります。
※コンセントにアースターミナルがない場合は、電気工事店にご相談ください。



3. 電源が入っていることを確認します。


※本体の電源ランプ（緑）が点灯することを確認します。

注意

- 給水タンクに水が入っていない場合、温水タンクの空だき防止のため、速やかに電源プラグをコンセントから抜いてください。（電源投入後40秒以内を目安にしてください。）

4 ACアダプター用プラグをコンセントに差し込む。


※プラグを差し込まないとシャワートイレは作動しません。

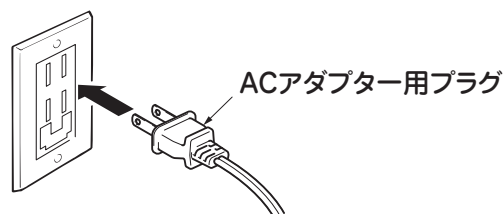

5 着座センサーが紙で覆われていることを確認し、 スイッチを押す。


※紙が貼られていない場合は、着座センサーを紙や布で覆ってください。

※人が便座に座ったことを感知する着座センサーが付いています。おしり洗浄、ビデ洗浄、脱臭は着座しないと作動しません。

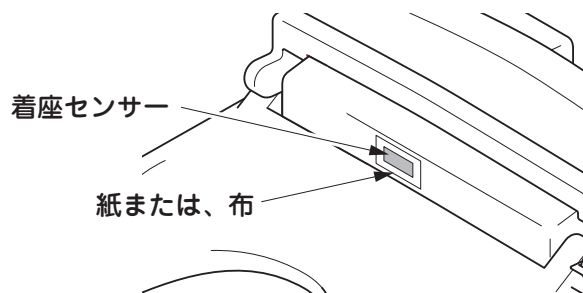

6 リモコンで洗浄強さを最弱に合わせます。

リモコン洗浄強さダイヤル

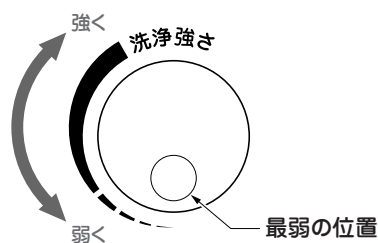


7 ノズルが伸びてきたら先端に手をかざし、シャワーを受け止める。

※ノズルから水が出るまで約1分かかります。
(洗浄強さを最強にしておくくと早く出ます)

8 シャワーが出てきたら、 スイッチを押す。

※ビデ洗浄、マッサージ洗浄についてもシャワーが出ることを確認してください。
(操作方法は22～23ページ)

9 着座センサーを覆っていた紙を外す。

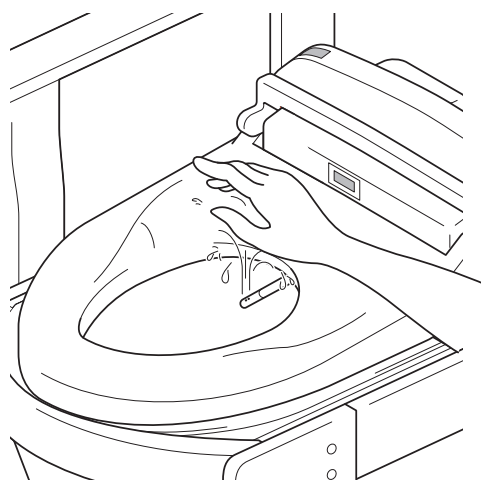


電源・便座・温水スイッチの使いかた

■ 電源の入／切

電源スイッチを押して、電源の入／切をします。

※電源が入ると表示部の電源ランプが点灯します。


※電源プラグをコンセントに差し込むと、自動的に電源は「入」の状態になります。

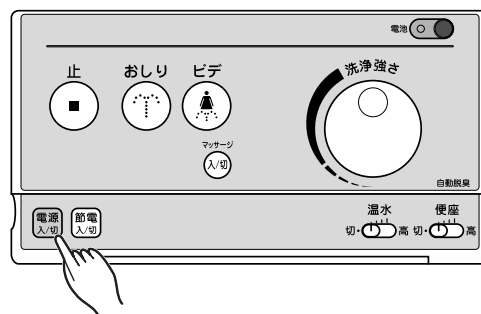

■ 便座の温度調節

便座スイッチを左右に動かして、便座の温度を調節します。

※スイッチは「切(室温)」「低(約28℃)」「中(約36℃)」「高(約40℃)」となっていますので、お好みの温度に設定してください。

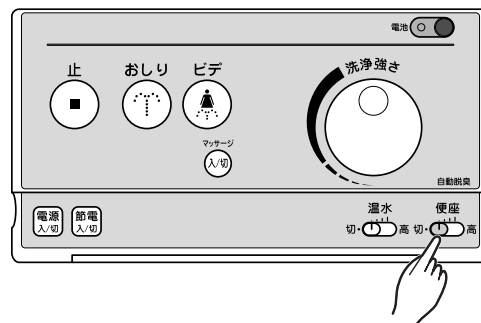

⚠ 注意

長時間使用するときや、次のような方が使用されるときは、便座スイッチを「低」または「切」にして使用する。



指示実行

- ご自分で温度調節のできない方、皮膚の弱い方、皮膚感覚の弱い方、睡眠薬など眠気を誘う薬を服用された方。

長時間使用されますと、低温ヤケドなどの原因になります。


アドバイス

- 便座はすぐには暖まりません。使用する10～15分前にスイッチを入れておけば、快適にご使用いただけます。
- 便座に座ると、自動的に便座ヒーターを切って、低温ヤケドをおこしにくくする「便座ヒーターオートOFF機能」が付いています。(P.25ページ)

■ 温水の温度調節

温水スイッチを左右に動かして、シャワーの温度を調節します。

※スイッチは「切(水温)」「低(約36℃)」「中(約38℃)」「高(約40℃)」となっていますので、お好みの温度に設定してください。

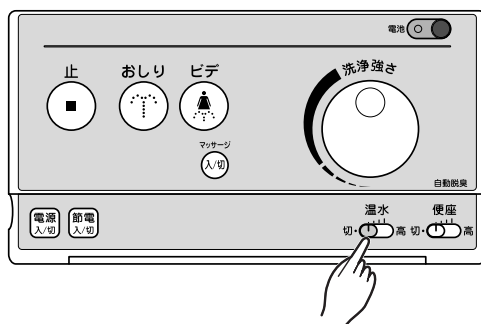

アドバイス

- 温水はすぐには暖まりません。使用する10～15分前にスイッチを入れておけば、快適にご使用いただけます。

おしり洗浄、ビデ洗浄のしかた

人が便座に座ったことを検知する着座センサーが付いています。おしり洗浄、ビデ洗浄は着座しないと作動しません。

■ おしり洗浄


1 おしりスイッチを押す。

※ノズルの先端からシャワーがでて、おしりを洗います。

2 洗浄強さダイヤルを回し、シャワーの強さを調節する。


3 止めるときは、 スwitchを押す。

※2分後に、自動的に停止するセルフストップ機構がついています。

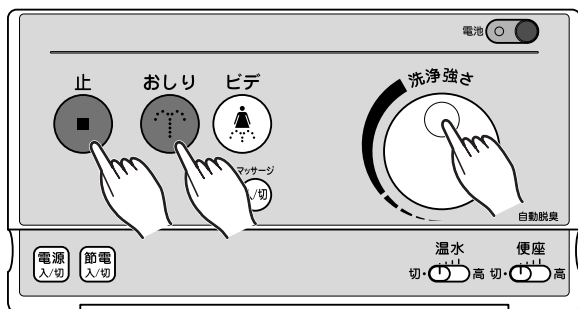

アドバイス

- 洗浄強さを、さらに強くしたい場合や、弱くしたい場合は変えることができます。(P.25～26ページ)

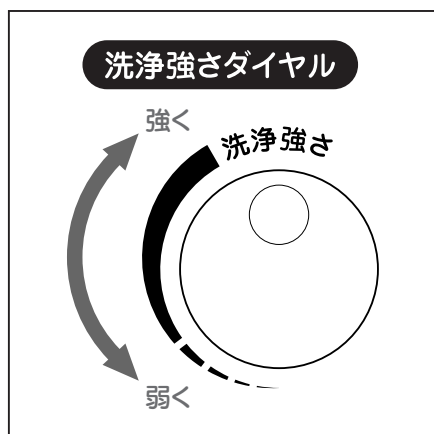

■ ビデ洗浄


1 スwitchを押す。

※ノズルの先端からシャワーがでて、女性のデリケートな部分を洗います。

2 洗浄強さダイヤルを回し、シャワーの強さを調節する。

3 止めるときは、 スwitchを押す。

※2分後に、自動的に停止するセルフストップ機構がついています。

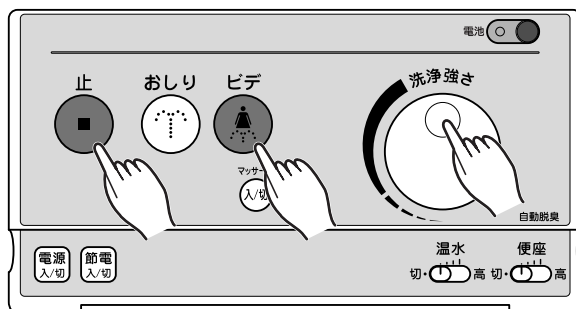

参考

- おしり洗浄の強さを一番弱くしてもまだ強いと思われる方のために、シャワーを最弱にする機能が付いています。(P.25ページ)

便座に座ったり、シャワースwitchを押した時は、温水を出す準備のためにノズル付近から、しばらく水が出ます。また、冬期や寒い地域などは、温水が温まるまでに時間がかかります。

便座に座った直後や洗浄の前後、温水温度switchを入れたときなど、ノズル付近から水が出ますが、これは構造上必要なもので、故障ではありません。(P.27ページ)


マッサージ洗浄のしかた

おしりを洗浄中に **マッサージ入/切** スイッチを押すと、洗浄強さに強弱がついてマッサージ洗浄になります。

※マッサージ洗浄の感じ方には、個人差があります。

■ マッサージ洗浄

- 1** **マッサージ入/切** スイッチを押す。
※シャワーに強弱がつきます。
- 2** 止めるときは、再び **マッサージ入/切** スイッチを押す。

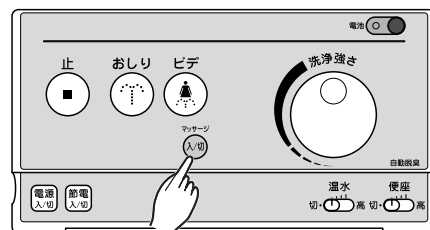


脱臭のしかた

人が便座に座ったことを検知する着座センサーが付いています。着座すると脱臭が作動します。

■ 脱臭

排泄時の臭いを除去します。

- 1** 便座に座る。
※自動的に脱臭を始めます。
※便座から立ち上がると、約1分後に停止します。

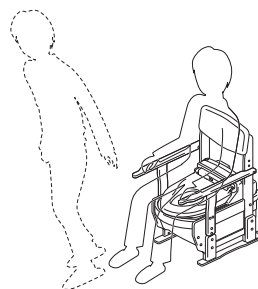

アドバイス



- 着座しても脱臭が作動しないように「切」にしておくことができます。(P.26ページ)

節電のしかた

長時間使用しない夜間など節電スイッチを押してから8時間、温水と便座のヒーターを「切」にして、消費電力を抑える節電です。8時間後、温水温度と便座温度を設定状態に戻します。

■ 節電

- 1** **節電入/切** スイッチを押す。
※シャワートイレ表示部の節電ランプ(緑)が点灯します。
※8時間経過すると、自動的に元の状態に戻り、節電ランプは消灯します。
- 2** 解除するときは、再び **節電入/切** スイッチを押します。
※節電ランプ(緑)が消灯します。

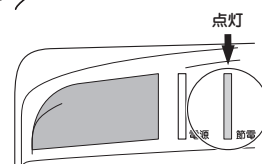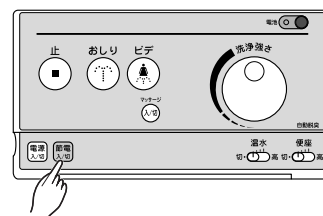

アドバイス

- 節電は、1日何回でも使用できます。
- 節電機能を使用しない場合でも、座シートをかぶせておくと節電効果があります。

注意

- 節電時は、温水と便座の温度を下げているため、冷たいと感じる場合があります。その際は、節電を解除してください。

より快適な機能

■ 便座ヒーターオートOFF機能について

着座と同時に便座ヒーターを切って、低温ヤケドをおこしにくくする「便座ヒーターオートOFF機能」が付いています。次のようにしてください。

- 1  スイッチと  スイッチを同時に2秒以上押す。


※シャワートイレ表示部の電源ランプが一瞬点滅するとセット完了です。

- 2 解除も同様の操作をします。

※機能設定中は連続使用などで、便座がつめたく感じる時があります。

※立ちあがると設定温度まで自動で戻ります。

※停電時や電源プラグを抜いたりしたときは、この機能が解除されますので再セットしてください。

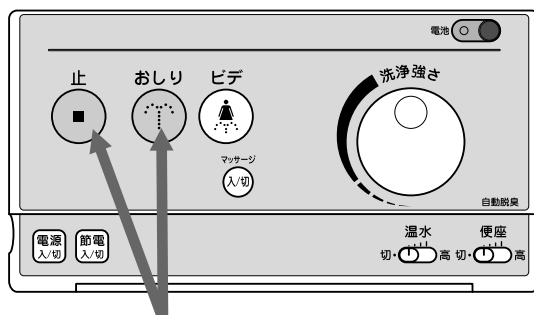

同時に2秒以上押します。

■ 洗浄強さをさらに弱くするには

おしり洗浄を「弱」にしてもまだ強いと思われる方は、次のようにしてください。


- 1  スイッチと  スイッチを同時に2秒以上押す。

※シャワートイレ表示部の電源ランプが一瞬点滅すると1段階弱くなります。弱くできる設定は2段階ありますので好みの強さに調節してください。

- 2 解除するときは、再び  スイッチと  スイッチを同時に2秒以上押す操作を繰り返し、合計3回目に元に戻ります。

※1段階弱くした場合は2回、2段階弱くした場合は1回の操作で戻ります。シャワートイレ表示部の電源ランプは操作のたびに一瞬点滅します。

※停電時や電源プラグを抜いたりしたときは、この機能が解除されますので再セットしてください。

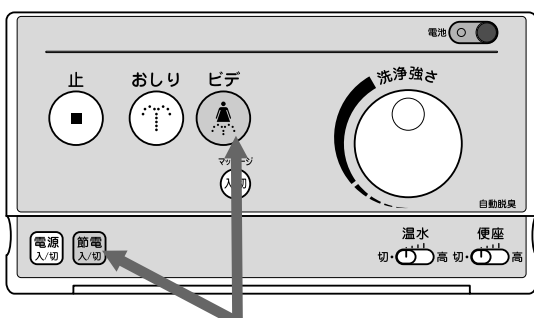

同時に2秒以上押します。

■ 洗浄強さをさらに強くするには

おしり洗浄を「強」にしてもまだ弱いと思われる方は、次のようにしてください。


- 1 **節電入/切** スイッチと **おしり** スイッチを同時に2秒以上押す。

※シャワートイレ表示部の電源ランプが一瞬点滅すると1段階強くなります。シャワートイレ本体の電源ランプは操作のたびに一瞬点滅します。

- 2 解除も同様の操作をします。

※操作のたびにシャワートイレ表示部の電源ランプは操作のたびに一瞬点滅します。

※停電時や電源プラグを抜いたりしたときは、この機能が解除されますので再セットしてください。

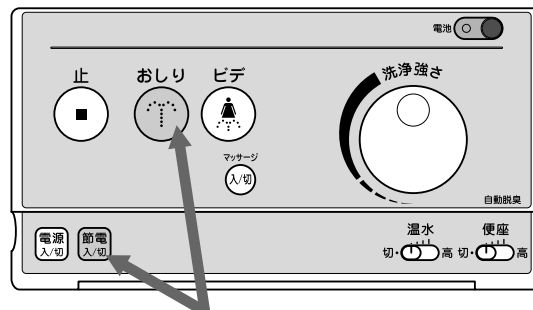

同時に2秒以上押します。

■ 便座「中」の温度を下げることができます


次の操作で便座温度「中」の温度設定を2℃下げることができます。次のようにしてください。

- 1 **節電入/切** スイッチと **止** スイッチを同時に2秒以上押す。

※シャワートイレ表示部の電源ランプが一瞬点滅すると完了です。

- 2 解除も同様の操作をします。

※停電時や電源プラグを抜いたりしたときは、この機能が解除されますので再セットしてください。

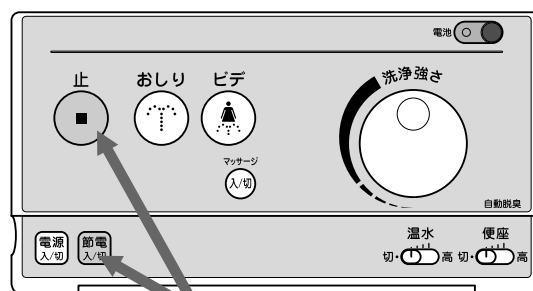

同時に2秒以上押します。

■ 脱臭を「切」にしたい場合は


次の操作で脱臭機能を「切」にすることができます。

- 1 **止** スイッチと **ビデ** スイッチを同時に2秒以上押す。

※シャワートイレ表示部の電源ランプが一瞬点滅すると、着座しても脱臭機能は作動しません。

- 2 解除も同様の操作をします。

※停電時や電源プラグを抜いたりしたときは、この機能が解除されますので再セットしてください。

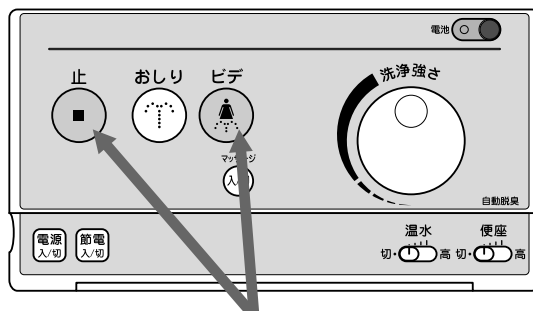

同時に2秒以上押します。

知っておいていただきたいこと

漏電表示ランプが点灯したとき


本体内部で漏電が発生すると、事故防止のために各機能を停止させ、電源プラグの「漏電」表示ランプを点灯させます。また、電源プラグに水がかかると漏電表示ランプが点灯する場合があります。

漏電表示ランプが点灯したときは、

1. 電源プラグをコンセントから抜き、20～30秒ほど間をおいて再び差し込みます。
2. リセットボタンを押してランプを消灯させます。

※上記の操作をしても再びランプが点灯するようであれば、電源プラグをコンセントから抜き、お求めの取扱店またはINAXメンテナンスへご連絡ください。

※電源プラグを差し直す時は、10秒程度時間をあけてください。

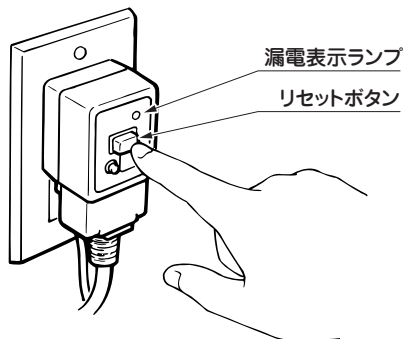

ノズルの付近から出る水は？

便座に座った直後や洗浄の前後、温水温度スイッチを押したときなど、ノズル付近から水が出ますが、これは構造上必要なもので、故障ではありません。

※上記以外のときやいつまでも水が止まらない場合は、止水栓を閉め、電源プラグをコンセントから抜き、お求めの取扱店またはINAXメンテナンスへご連絡ください。



ゆっくり閉じる便座

便座には、あやまって倒したときなどの衝撃をやわらげるため、ゆっくりと閉じるようにスローダウン機構が装備されています。

※強引に閉じると故障の原因になることがありますのでご注意ください。

省エネについて

省エネのためには、以下の項目が有効です。

- 便座や温水の設定はむやみに高温にせず、快適さを損なわない程度に調節しましょう。
- 春夏秋冬、気温に合わせてこまめに温度設定を行いましょう。
- 節電機能はできるだけ利用しましょう。
- 長時間の外出時など、不在時はこまめに電源を切っておきましょう。

シャワーの温度について


- おしりまたはビデ洗浄を長時間使用しますとシャワーの温度がしだいに低下し、そのままさらに使用すると最後には水になります。冬期には冷水(約5℃)から高(約40℃)になるまでに約10分間かかります。
- シャワーの温度は、スイッチの位置に合わせて一定の温度に調節しています。

温水タンク内制御温度

低: 約36℃、中: 約38℃、高: 約40℃。

着座センサーが付いています

人が座っていないときに誤ってスイッチを押してもシャワーが噴出しないよう、着座センサーが付いています。したがって便座に座らないとおしり洗浄、ビデ洗浄、脱臭の各機能がはたらきません。

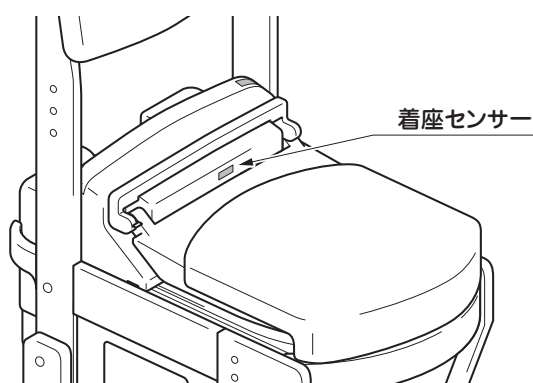

着座センサーは光の反射を利用しているため、次のような場合に作動しないことがあります。

- 前にかがんだり、前寄りに座った場合
※便座に深めに座る等、座り方を変えてみてください。
- 黒色や毛羽立った布地などの光が反射しにくい衣服を着ている場合
※センサーに手をかざす等、肌を検知させるようにしてください。
- センサーに汚れや水滴が付着している場合
※汚れや水滴等を取り除いてください。

リモコンについて

- リモコンの電池マーク点滅は、電池消耗をお知らせするサインです。お早めに新しい電池に交換してください。(P.38ページ)
※部屋の広さ、壁の仕上げや色(特に黒っぽい色)等により、電池マークが点滅する前に使用できなくなる場合があります。(信号が弱くなるため)

ラジオやテレビに雑音が入ったら

シャワートイレにラジオやテレビを近づけると、雑音が入ることがあります。このような場合は、雑音が入らない位置までラジオやテレビを離して使用してください。



温かいシャワーの量と温度は？

- 温水タンクの貯湯量は、0.88Lです。おしりまたはビデ洗浄を長時間使用しますとシャワーの温度がしだいに低下します。続けて使用する場合は、3分間程度待ってから再度使用してください。
- シャワーの温度は、スイッチの位置に合わせて一定の温度に調節しています。
温水タンク内制御温度
低：約36℃、中：約38℃、高：約40℃。
冬期には冷水(約5℃)から適温(約40℃)になるまでに約15分かかります。



椅子としての使用方法

座シートを便座の上にかぶせると、椅子としてご使用いただけます。

⚠ 警告

歩行、立ち座りに介助が必要な方は1人で使用しないでください。

転倒し、ケガをする恐れがあります。



禁止


⚠ 警告

座った状態で、背シートにむやみに体重をかけないでください。

転倒、横滑り、破損し、ケガをする恐れがあります。



禁止

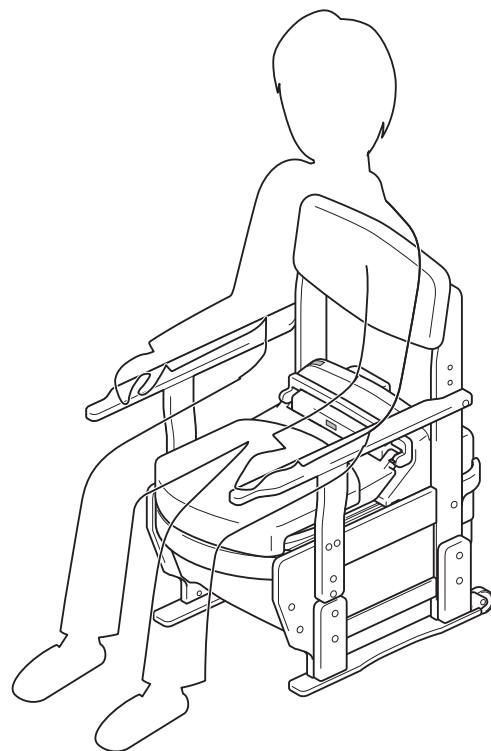

注意

- 座シートにセンサー作動停止布を貼っていない状態で便座の上にかぶせると、脱臭が作動します。

※脱臭の作動を止めるには、センサー作動停止布を座シートに貼ってください。

(P14ページ)

お手入れの方法

ポータブルトイレを快適にご使用いただくためにも、お手入れを実施してください。

日頃のお手入れ


■ 便座や便フタ・専用バケツ類（プラスチック部）のお手入れのしかた

● 柔らかい布で水ぶきをしてください。

汚れは放っておくと落ちにくくなりますので、こまめに水ぶきをしましょう。また、水ぶきは静電気を防ぎます。静電気はホコリを引き寄せ、黒く汚れる原因になります。

● お手入れには当社純正のトイレ用おそうじティッシュまたはシャワートイレお掃除クリーナー（別売品）をおすすめします。

市販の便座用おそうじティッシュが使用できますが、中には適さない製品があります。ご不明な点は洗剤メーカーに確認してから使用してください。別売品の購入方法については46ページをご覧ください。

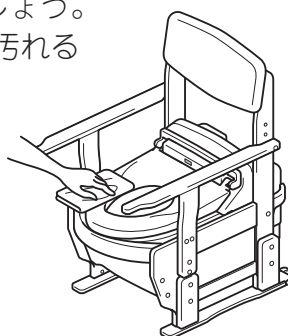


注意

- 本体のお手入れをするときは、電源スイッチを押して表示部の電源ランプが消灯していることを確認してから行ってください。
- トイレ用洗剤、住宅用洗剤、ベンジン、シンナー、クレンザー、ナイロンたわしは使用しないでください。
※変色、破損の原因になります。

⚠ 警告

本体内に水や洗剤を入れないでください。本体や電源プラグ部に水をかけないでください。

感電・火災の恐れがあります。

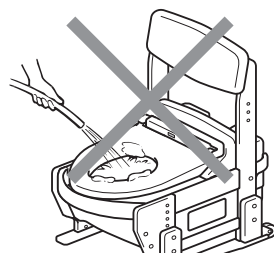

⚠ 注意

プラスチック部のお手入れには、便座に使用できる洗剤以外（トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、クレンザー、クレゾール）は使用しないでください。


プラスチック部が割れてケガや感電・火災の原因となります。



■ 電源プラグ（漏電保護機能付）の点検

電源プラグの故障は思わぬ事故につながる可能性があります。月に1～2回程度、点検を行ってください。

- 1 電源プラグのテストボタンを押して、漏電表示ランプが点灯することを確認する。
- 2 リセットボタンを押して、漏電表示ランプが消灯することを確認する。

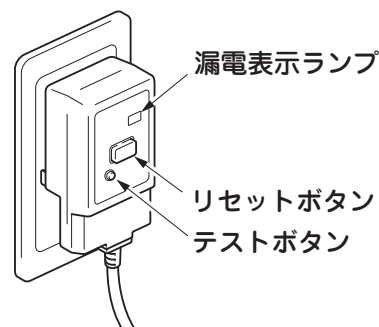

隠れた部分のお手入れ

注意

- お手入れをするときは、必ず電源プラグとACアダプターをコンセントから抜いてシャワートイレ本体の電源ランプ（9ページ）が消灯していることを確認してください。


バケツトレイやシャワートイレなどを取り外し、隠れた部分もお掃除できます。

※便座補助プレートを取り付けている場合は、はじめに外してください。

■ バケツ受けとバケツトレイの外しかた

- 1 バケツ受けを手前に引き出す。
- 2 バケツトレイを上を持ち上げて外す。
- 3 バケツ受けの左右フックを矢印方向に回し、バケツ受けをさらに手前に引き出して外す。

- 外したバケツ受けとバケツトレイを掃除します。

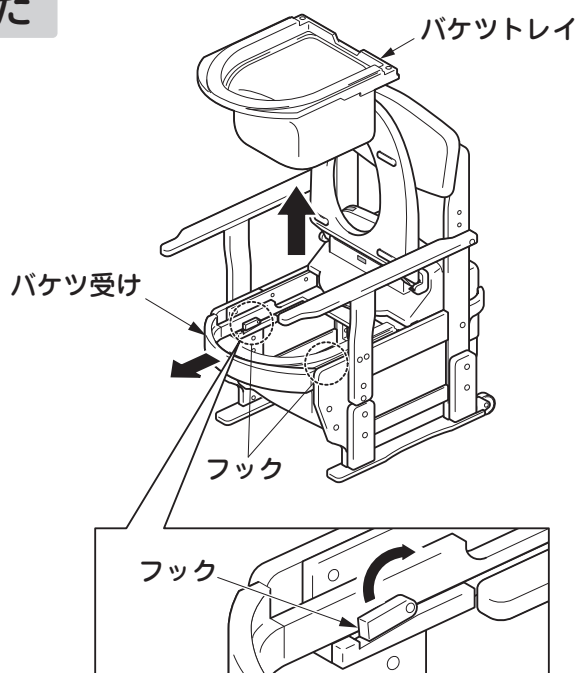


▶ 取り付けかた

- 1 バケツ受けを手前から奥に差し込み、左右フックを図の位置にセットする。
- 2 バケツトレイをバケツ受けの上に乗るように入れる。

注意


- バケツトレイは、がたつき、ずれがないように入れてください。

- 3 バケツ受けを奥まで押し込む。

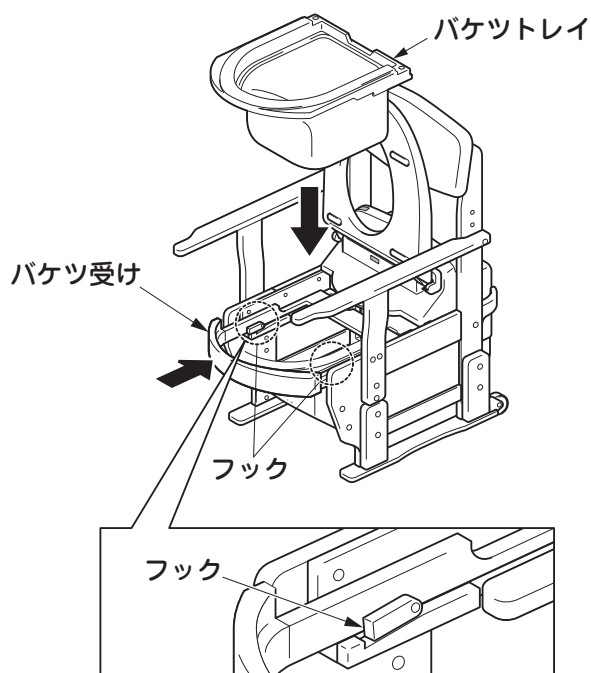


■ 給水タンクの外しかた

- 1 給水タンクから、ACアダプター用コネクターと本体用コネクターを抜く。

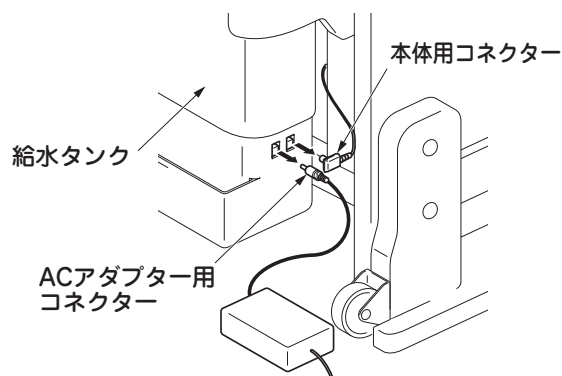


- 2 付属の六角レンチを使って、右側の給水タンク受けを外す。

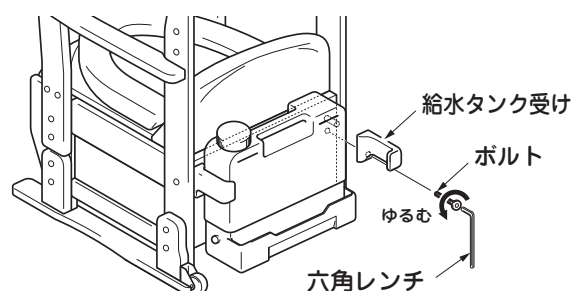

- 3 給水タンクを持ち上げ、本体から外し、図のように置く。

部分が掃除できます。

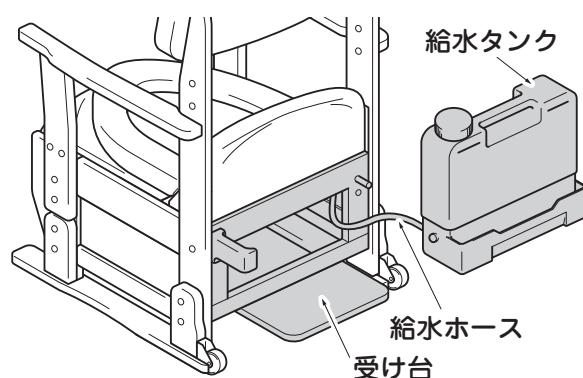

注意


- 給水ホースは外さないでください。
※漏水の原因になります。
- 給水ホースを無理に引っ張らないようにしてください。
※破損の原因になります。

▶ 給水タンクの取り付けかた

- 1 給水タンクを受け台に乗せ、給水タンク受けとボルトを使って本体に固定してください。

※給水ホースが折れ曲がっていないことを確認してください。

- 2 ACアダプター用コネクターと本体用コネクターを給水タンクに差し込んでください。

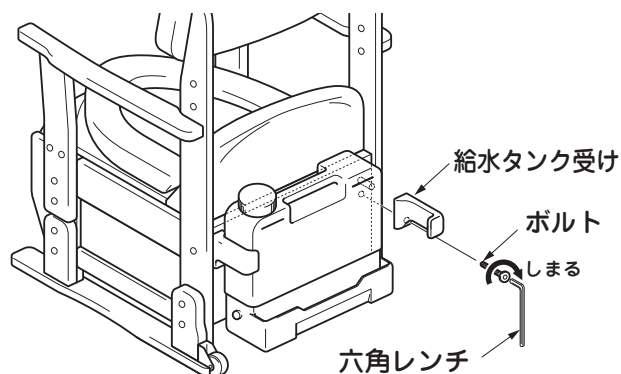


注意


- お手入れをするときは、必ず電源プラグとACアダプターをコンセントから抜いてシャワートイレ本体の電源ランプ（9ページ）が消灯していることを確認してください。

■ 便座ストッパーの外しかた

- 1 右側のロックレバーを上げ、便座ストッパーを上を浮かせて、ピンから外す。

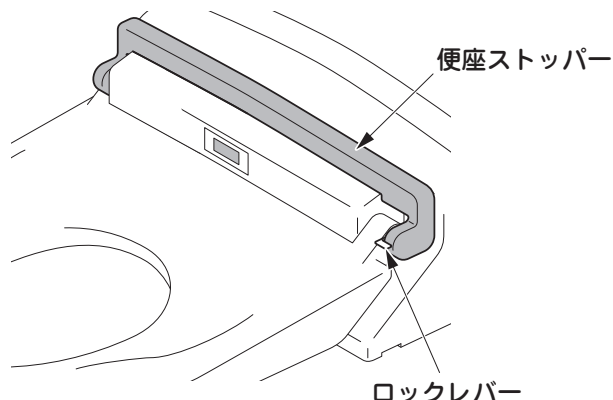


- 2 便座ストッパーを浮かせた状態で、左側にずらして外す。

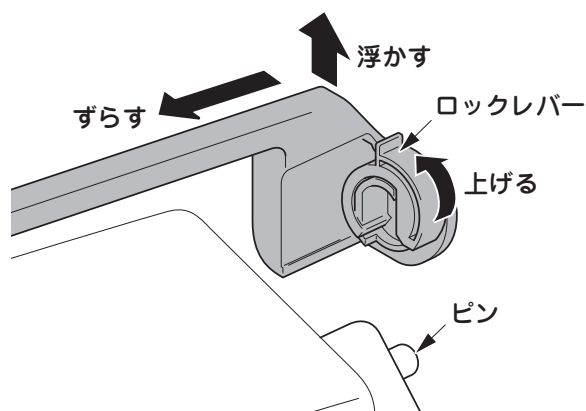

- 便座ストッパーで隠れていた部分と、外した便座ストッパーを掃除します。

▶ 便座ストッパーの取り付けかた


- 1 便座ストッパー左側のピン穴を左側のピンに合わせて差し込む。

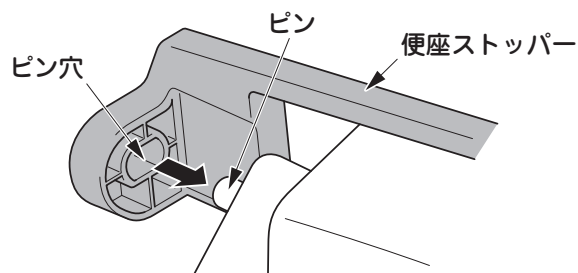

- 2 ロックレバーを上げた状態で、便座ストッパー右側のピン穴を右側のピンに合わせて差し込む。

- 3 ロックレバーを下げる。


- 4 便座ストッパーを上げる。

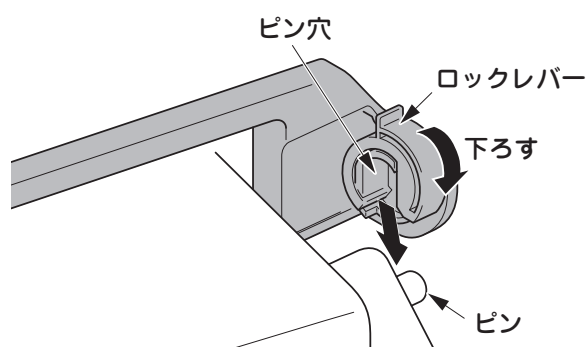

※便座ストッパーが降りた状態では、シャワートイレ機能が作動しません。

■ シャワートイレの外しかた

- 1 電源プラグをコンセントから抜く。
- 2 給水タンクを外す。(☞32ページ)
- 3 本体取付ボルトから取付ナットを外す。

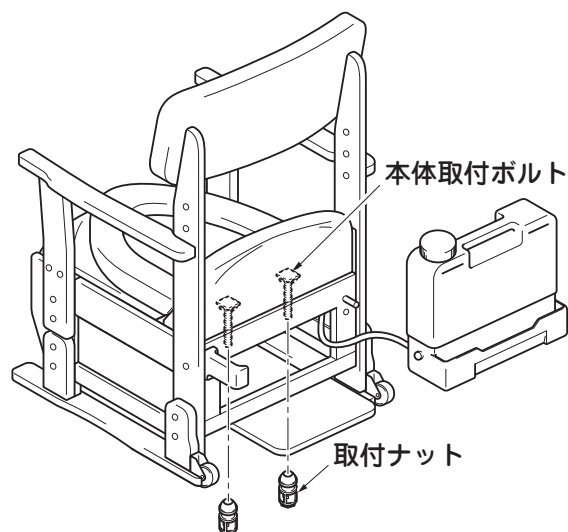


- 4 シャワートイレを傾けないように、ゆっくり持ち上げ、本体取付ボルトの先端が椅子から抜けたら、図の位置に静かに置く。

部分が掃除できます。

注意

- 給水ホースは外さないでください。
※漏水の原因になります。
- 給水ホースを無理に引っ張らないようにしてください。
※破損の原因になります。

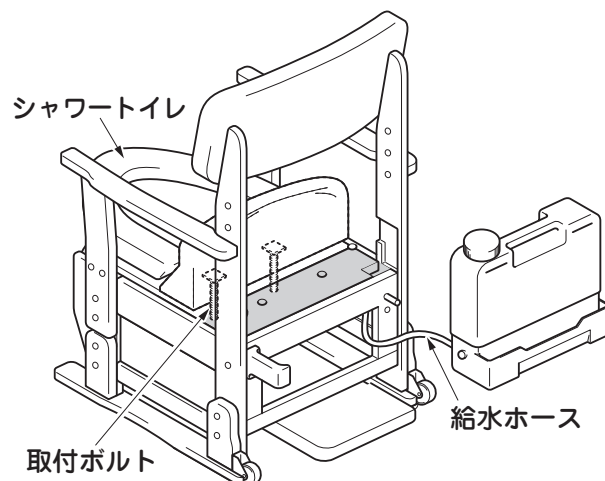


- 5 温水タンク内の水を抜きます。
(☞39ページ)

▶ シャワートイレの取り付けかた



1 シャワートイレに本体取付ボルトと平パッキンが取り付けられていることを確認する。

※もし、外れていたらボルト穴に取り付けてください。


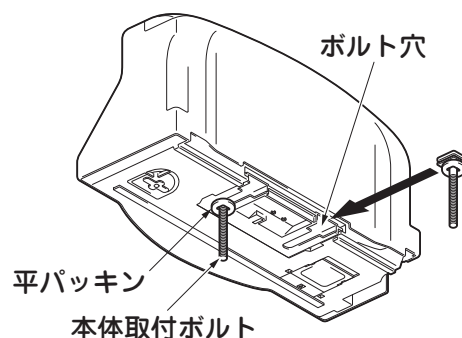


2 本体取付ボルトを椅子の取付穴に差し込み、取付ナットを通して締め付ける。

※もし、取付ナットが閉じていたら、引っ張って開いてください。

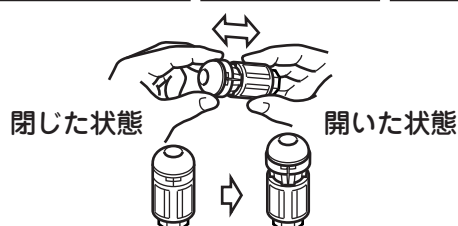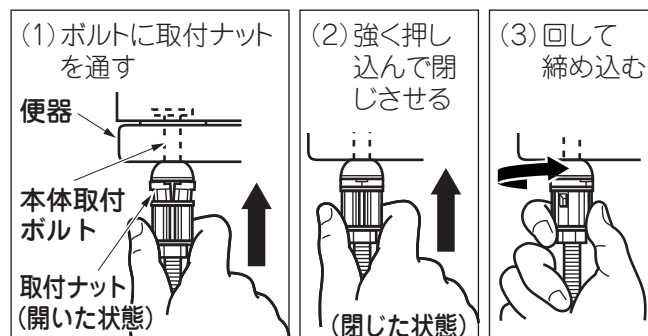

※黒色のゴムを上側に向けて組み付けてください。

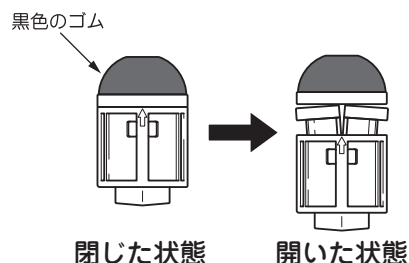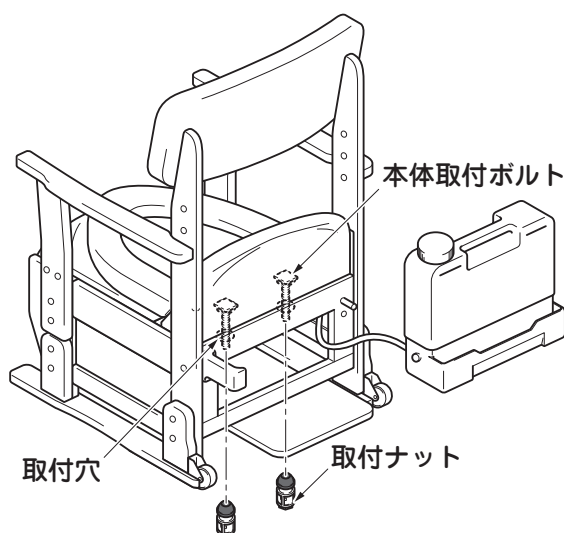

3 給水タンクを取り付ける。 (P.32ページ)

シャワートイレのお手入れ

注意


- お手入れをするときは、必ず電源プラグとACアダプターをコンセントから抜いてシャワートイレ本体の電源ランプ（9ページ）が消灯していることを確認してください。

■ ノズルのお手入れ

長期間のご使用により、ノズル穴が詰まる場合があります。そのような場合は、次の要領でお掃除をしてください。

- 1 ノズルを手前に引き出し、スポンジなどで掃除する。

※ノズルを無理に引っ張る、曲げるなどしないでください。

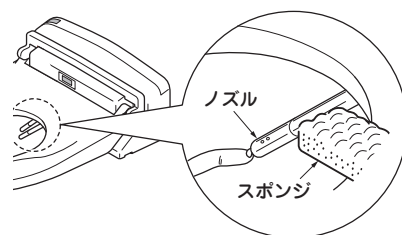


■ ストレーナーのお手入れ

長期間のご使用により、シャワーの勢いが弱くなったときは、次の要領でストレーナーのお掃除をしてください。


〈シャワートイレ左側面〉

- 1 シャワートイレ左下のストレーナーを工具で回して外す。

※少量の水がこぼれますので洗面器などを下に置いてください。

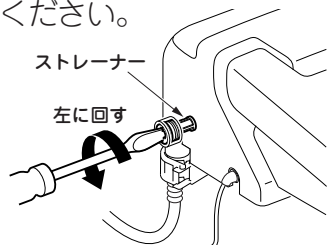


- 2 ストレーナーに付いているゴミを水洗いして取り除く。

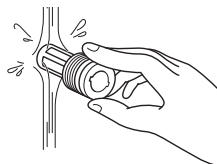

- 3 ストレーナーを工具で取り付ける。

- 4 ストレーナーの端がシャワートイレと段差がなくなるまで締め付ける。

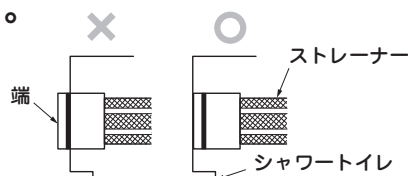

⚠ 注意

ストレーナーを取り付けるときは、ストレーナーの端と本体に段差がなくなるまで締め付けてください。漏水の原因になります。




〈ポータブルトイレ背面 給水タンク〉

- 1 給水タンクのキャップとストレーナーを外す。

- 2 ストレーナーに付いているゴミを水洗いして取り除く。

※左右表記は、ポータブルトイレに向かって見た場合です。

- 3 ストレーナーとキャップを戻す。

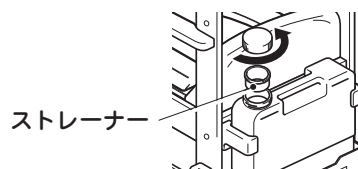

■ 脱臭カートリッジのお手入れ


脱臭カートリッジにホコリ等が付着すると十分な脱臭ができなくなります。
ニオイが気になりだしたら、次の要領でお掃除をしてください。

- 1 電源プラグをコンセントから抜きます。
- 2 シャワートイレ底面にある取付口ふたを取り外す。
- 3 脱臭カートリッジを引き出す。
- 4 フィルターのほこり等を歯ブラシなどで取り除く。

※脱臭カートリッジは水洗いできませんので
ご注意ください。

- 5 脱臭カートリッジのつまみを持ち取付口にそって差し込み、取付口ふたを取り付ける。

※脱臭カートリッジは図の向き（角がない方を上向きにして）で取り付けてください。

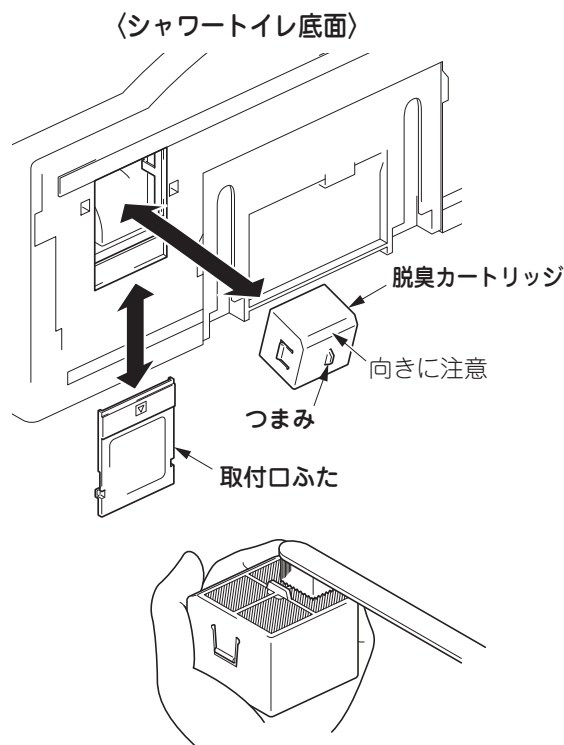

▶ 脱臭カートリッジのお取り替えについて

- 清掃してもまだニオイが気になる場合、脱臭カートリッジの寿命ですので、新品と交換してください。
- 脱臭カートリッジの寿命は、通常使用で約7年です。

まずシャワートイレ使用開始日を右の日付記入欄に記入し、脱臭カートリッジ交換の目安としてください。

次回脱臭カートリッジを交換する場合は、脱臭カートリッジにある日付ラベルに使用開始日を記入してください。

シャワートイレ使用開始日をご記入ください。

年 月 日

※お取替用の脱臭カートリッジのお求めは、46ページ“別売品の購入方法”をご覧ください。

▶ 抗菌部位について

ノズル・便座・カバーに抗菌プラスチックを、リモコンのスイッチシートには抗菌シートを採用しています。

KILAMIC 抗菌商品について

- KILAMIC 抗菌商品は、商品表面の細菌の繁殖を抑える効果を持ちますがホコリ・油膜等が表面を覆った場合には、十分な抗菌効果を発揮できないことがあります。
- KILAMIC 抗菌商品は、商品表面の細菌の繁殖を抑える効果を持ちますが、細菌が全くなくなるわけではありません。従って感染等が防げるわけではありません。
- 抗菌製品技術協議会の抗菌製品規格SIAA*に適合した製品です。

*：SIAA マークは、抗菌製品技術協議会の「安全性と抗菌性能などのガイドライン」に沿って品質管理された製品に表示されるマークであり、情報公開されています。

リモコンの電池交換


電池の寿命が近づくと、リモコンの電池ランプが点滅します。電池ランプが点滅したときは、次の要領で取り替えてください。



1 電池カバーを外す。

2 新しいアルカリ電池（1.5V、単三形、2本）を用意し、 $\oplus\ominus$ の方向を確認して取り替える。

3 電池カバーを取り付ける

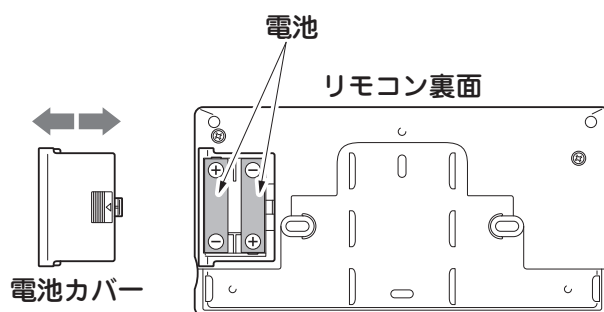

注意

- アルカリ電池を使用してください。

⚠ 警告

電池は以下の事を守り、正しく使用してください。

- $\oplus\ominus$ を正しく入れてください。
- 長期間使用しないときは、電池を取り出してください。
- 使い切った電池はすぐに器具から取り出してください。
- 電池を破棄する時は、テープなどで絶縁を行ってください。
※電池の液もれにより火災の原因となります。
- 乳幼児の手の届く場所には置かないでください。
※誤って飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 電池液が身体に付着したときは、水でよく洗い流してください。
- 液が目に入ったときは、目をこすらずにすぐにきれいな水で洗ってください。
※失明の恐れがあります。医師に相談してください。



⚠ 警告

電池を取り扱うときは、以下の事はしないでください。

- 金属製のもの（ネックレス・ヘアピン等）と一緒に持ち込んだり保管しないでください。
- 新しい電池と古い電池や種類の異なる電池と一緒に使用しないでください。
- 過熱・分解したり、水や火の中に入れたりしないでください。
※電池の液もれにより火災の原因となります。



長期間使用しない場合




ポータブルトイレを長期間使用しないときは、電源プラグおよびACアダプターをコンセントから抜き、シャワートイレ内、給水タンク内の水を次の要領で抜いてください。

注意

- 水抜きをするときは、必ず電源プラグとACアダプターをコンセントから抜き、床にビニールシートなどを敷いてから行ってください。
- 給水ホースは外さないでください。
※漏水の原因になります。
- 給水ホースを無理に引っ張らないようにしてください。
※破損の原因になります。

■ シャワートイレ内(温水タンク)の水の抜きかた

- 1 シャワートイレを本体から外す。
( 34ページ)
- 2 シャワートイレ底面の水抜栓を左（反時計回り）に90度回してゆるめる。
- 3 水抜栓を引き出し、シャワートイレを手前に傾けて水を抜く。
- 4 水抜き完了後、水抜栓を右（時計回り）に90度回して締め付ける。

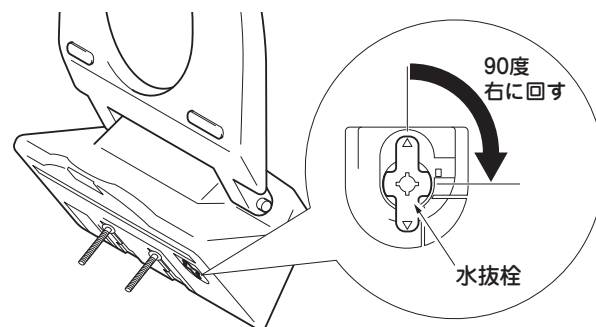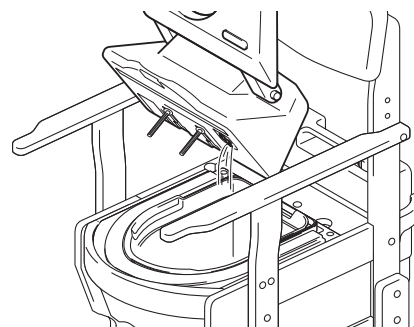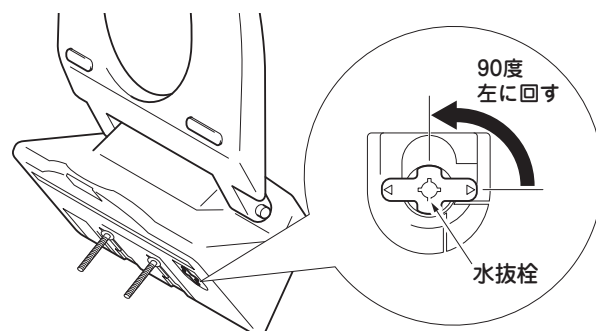

⚠ 注意

長期間使用しない場合、給水タンク内、シャワートイレ内の水を抜き、電源プラグ、ACアダプターを抜く。

水が腐敗して皮膚炎症などを起こす原因になります。




指示実行

5 ストレーナーをシャワートイレから取り外す。(☞36ページ)

6 シャワートイレを傾けて水を抜く。

7 水抜き完了後、ストレーナーをシャワートイレに取り付け、シャワートイレを本体に取り付ける。
(☞36ページ)


※再び使用するときは、必ず“使用前の準備”
(19～21ページ)を行ってください。

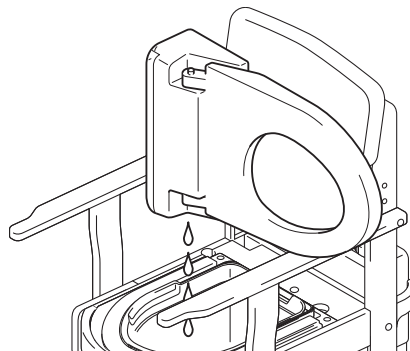

■ 給水タンクの水の抜きかた

1 給水タンクを本体から外す。
(☞32ページ)


2 キャップを給水タンクから外す。

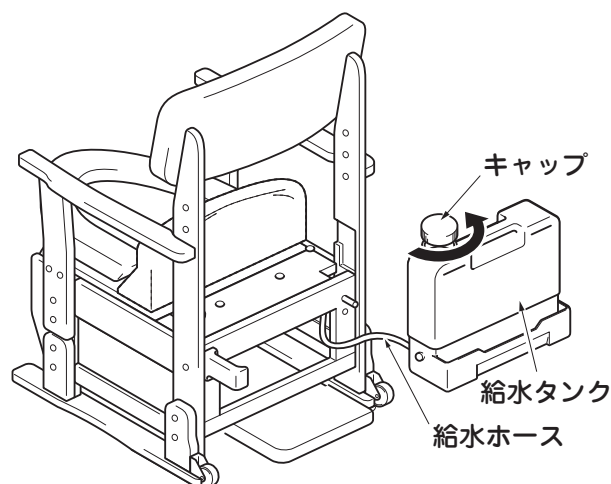

3 給水タンク内、給水ホース内の水を抜く。

4 給水タンクを本体に取り付ける。
(☞32ページ)

※再び使用するときは、必ず“使用前の準備”
(19～21ページ)を行ってください。

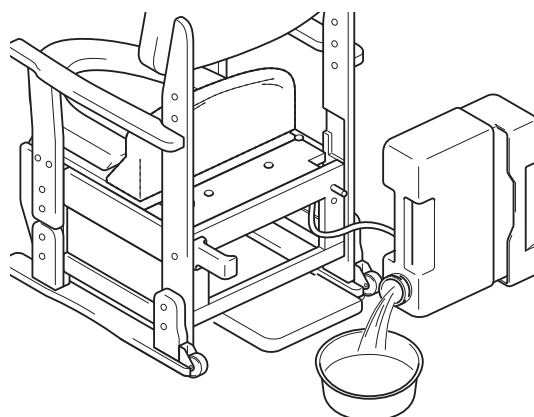

長期間使用しない場合

故障かなと思ったら

故障が簡単に直る場合がありますので下記項目をお調べになり、故障が直らないときは、お買い上げの販売店もしくはお客さま相談センターにご相談ください。

全機能

こんなとき	原因	処置
全く作動しない	コンセントに電気がきていない。	漏電ブレーカーを確認します。 (P30ページ)
	リモコンの電池が切れている。	新しい電池に交換します。 (P38ページ)
	リモコン送信部またはシャワートイレ本体受光部が汚れている。	汚れを取り除きます。
	漏電している。(電源プラグの漏電表示が点灯している)	電源プラグのリセットボタンを押します。 (P27ページ) それでもランプが点灯するようであれば漏電していますので、修理を依頼してください。
	電源が「切」(電源ランプ消灯)になっている。	電源スイッチを押して、電源ランプを点灯させます。(P22ページ)
	電源プラグ・ACアダプターがコンセントに差し込まれていない。	電源プラグ・ACアダプターを完全に差し込みます。(P19ページ)

おしり・ビデ洗浄

こんなとき	原因	処置
シャワーがノズルから出ない	電源プラグ・ACアダプターがコンセントに差し込まれていない。	電源プラグ・ACアダプターを確実に差し込みます。(P19ページ)
	〈使用前の準備の場合〉 洗浄強さが弱になっているか、スイッチを押してから1分経っていない。	洗浄強さを強にして再度、シャワースイッチを押します。 (P19～21ページ)
	着座センサーが検知しにくい衣服をきています。	着座センサーに手などをかざします。(P28ページ)
	着座センサーが作動していない。	便座に深く座るなど、座りかたを変えます。(P28ページ)
	着座センサーに汚れや水滴などが付着している。	汚れや水滴などを取り除きます。 (P28ページ)
	ストレーナーが目づまりしている。	ストレーナーの掃除をします。 (P36ページ)

こんなとき	原因	処置
シャワーが温かくない	温水スイッチが適当な温度に調節されていない。	温水スイッチを適当な温度に調節します。(P22ページ)
	シャワーを続けて使用している。	約3分で温かくなります。(P28ページ)
	節電中になっている。	節電を解除します。(P24ページ)

暖房便座

こんなとき	原因	処置
便座が温かくない	便座スイッチが適当な温度に調節されていない。	便座スイッチを適当な温度に調節します。(P22ページ)
	節電中になっている。	節電を解除します。(P24ページ)
長く座っていると便座がぬるくなる	便座ヒーターオートOFF機能が作動している。	便座ヒーターオートOFF機能を解除します。(P25ページ)

脱 臭

こんなとき	原因	処置
脱臭ファンがとまらない	着座センサーに紙が貼りついている。	着座センサーの紙を取り除きます。(P21ページ)
	センサー作動停止布を貼っていない。	センサー作動停止布を貼ります。(P14ページ)

その他

こんなとき	原因	処置
シャワートイレ本体ががたつく・ずれる	取付ナットがゆるんでいる。	取付ナットを締め直してください。(P35ページ)
電源ランプが点滅している	「便座」や「温水」機能に不具合が生じている。または、点検時期が来ている。	故障または点検時期ですので、コンセントから電源プラグを抜いて修理または、点検をお受けください。

故障かなと思ったら

アフターサービス

1. 修理を依頼される前に

商品が故障したら「故障かなと思ったら」(41ページ)を参照してください。
それでも故障が直らない場合は、お求めの取扱店またはINAXメンテナンスにご相談ください。
なお、不具合でなくても下記の場合はご相談ください。

- 取扱説明書どおりに使用されても、まだ不明な点がある場合
- コードの傷みやコンセントのガタツキ
- コンセントや電源プラグ、コードの過熱

上記の場合、そのままにしておくと思わぬ事故につながる恐れがあります。必ずご相談ください。

⚠ 警告

シャワートイレ本体・電源プラグ・コードが故障(異音・異臭・発煙・高温・割れ)した場合、ただちにコンセントから電源プラグを抜き、修理を依頼してください。



指示実行

感電・火災の原因になります。

シャワートイレ本体および給水部から漏水した場合、コンセントから電源プラグを抜き、止水栓を閉めてください。

感電・火災・室内浸水の原因となります。

⚠ 警告

修理技術者以外の方は、分解したり修理・改造は行わないでください。



分解禁止

感電・火災・ケガの原因になります。

2. 保証書をご覧ください

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は取付けの日から2年間です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

3. 修理を依頼されるとき

■保証期間中の修理


修理に際しては、必ず保証書をご提示ください。
保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

■連絡していただきたい内容

1. ご住所・ご氏名・電話番号
2. 品番・製造番号(背面のシールをご覧ください。)
3. お取り付け日(保証書をご覧ください)
4. 故障内容・異常の状況(できるだけ詳しく)
5. 訪問ご希望日

■保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
料金の内訳は、技術料+出張料+部品代です。

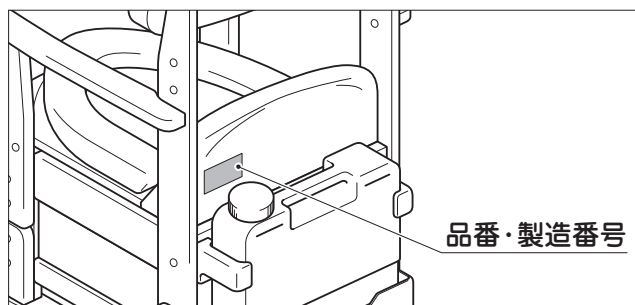

品番・製造番号

4. 補修用性能部品の最低保有期間

シャワートイレの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。保有期間経過後の修理では、部品がない場合がありますのでご了承ください。

※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. 定期点検のおすすめ

有料となりますが、次のような場合は定期的にシャワートイレの点検を受けていただくことをおすすめします。

- ご使用上支障がなくても長くお使いいただくため、お買上げより3年たったもの
- 温泉地域および海岸付近など、特に腐食をおこしやすいところで使用されるもの
- 長期間のご使用により電源ランプが点滅したら

定期点検については、INAXメンテナンスまでご相談ください。

点検料金の内訳は、点検料（技術料）＋出張料＋部品代（交換した場合）です。

6. 商品についての使い方・お手入れ方法等のお問い合わせは

お客さま相談センター

TEL ☎ 0120-1794-00

FAX ☎ 0120-1794-30

受付時間 平日 9:00～18:00

土・日・祝日 9:00～17:00

（ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く）

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・IP電話などではご利用になれない場合がございます。

下記番号をご利用ください。

TEL :0562-40-4050

FAX:0562-40-4053

7. 商品についての修理のご依頼は

INAXメンテナンス 修理受付センター

TEL ☎ 0120-1794-11

FAX ☎ 0120-1794-56

受付時間9:00～20:00（365日受付）

ホームページアドレス <http://www.i-mate.co.jp>

仕 様

品 番			CWA-202	
サ イ ズ	製品寸法		幅590×奥行670mm×高さ(800・830・860mm)	
	カラー(シャワートイレ部)		オフホワイト (BN8)	
	便座サイズ		最大開口部寸法 290×200mm	
	座面高さ		3段階 350・380・410mm	
	肘掛け高さ		3段階 190・220・250mm (便座面より)	
	肘掛け内寸		465mm (中心部)	
	給水タンク		幅360×奥行120×高さ330mm	
材 質	椅子本体		天然木(ラバーウッド)＋ウレタン塗装	
	便座		ポリプロピレン	
	バケツ・バケツトレイ、ふた		ポリプロピレン	
	背シート・座シート		合板、ウレタン、ポリウレタン	
	給水タンク		ポリプロピレン	
バケツ容量	最大容量		7.5 ℓ	
	使用容量		5.5 ℓ 以下	
最 大 使 用 者 体 重			80kg	
製 品 質 量			21kg	
給 水 タ ン ク 容 量			5.0 ℓ	
電 源	ポ ン プ	定格電源	AC100V 50/60Hz	
		定格消費電力	45W	
	シャワー トイレ	定格電源	AC100V 50/60Hz	
		定格消費電力	310W	
シ ャ ワ ー ト イ レ 機 能	おしり・ ビデ洗浄	温水タンク・貯湯量		貯湯式・0.88 ℓ
		ノズル		おしり・ビデ専用オートスライド式
		ノズル穴		おしり用：直径1.3mm×2コ ビデ用：直径0.9mm×10コ
		吐水量	おしり洗浄	0～0.9 ℓ /分 (5段階調節)
			ビデ洗浄	0～0.9 ℓ /分 (5段階調節)
		温水ヒーター容量		250W
		温水タンク内制御温度		切(水温)・低(約36℃)・中(約38℃)・高(約40℃)
	安全装置		温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空ダキ検知回路	
	便 座	ヒーター容量		45W
		表面温度		切(室温)・低(約28℃)・中(約36℃)・高(約40℃)
		温度調節		4段階切替 (マイコン制御)
		安全装置		温度ヒューズ
	脱 臭	脱臭方式		脱臭カートリッジによる化学吸着方式
		脱臭能力		0.11m³/分
		脱臭カートリッジ寿命		約7年
	節 電 機 能			ワンタッチ節電 (8時間後自動復帰)
電源コード	給水タンク用 ACアダプター		有効長さ2.9m	
	シャワートイレ用		本体：有効長さ1.0m (漏電保護プラグ・アースコード付) 延長コード：有効長さ1.9m (アースコード付)	
使 用 環 境 温 度			0～40℃	

注意 この商品は、日本国内向け仕様です。海外での使用は、おやめください。

別売品のご案内


当社では、快適なトイレ空間作りのお手伝いとして、シャワートイレのメンテナンス用品をはじめとする、数々の別売品を用意しております。

別売品について

■トイレ用おそうじティッシュ (品番：CWA-36)


プラスチックを傷めず、除菌効果に優れたトイレ専用ウェットティッシュです。使用後、便器にそのまま流せます。

※環境にやさしい牛乳パック再生紙使用。
(☎30ページ)

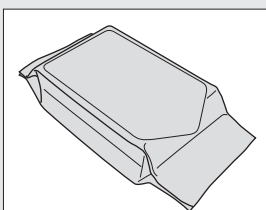


■シャワートイレお掃除クリーナー (品番：CWA-20)

プラスチックを傷めないスプレー式シャワートイレ専用洗剤です。シュッと吹きかけて、ただふき取るだけ。脱臭剤配合で便器にもご使用になれます。(☎30ページ)

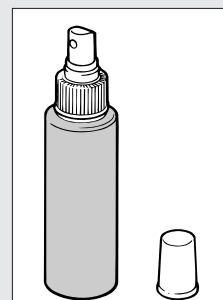

■取替え用脱臭カートリッジ (品番：CWA-29)

脱臭カートリッジの寿命は、約7年です。ニオイが気になりだしたら交換してください。
(☎37ページ)

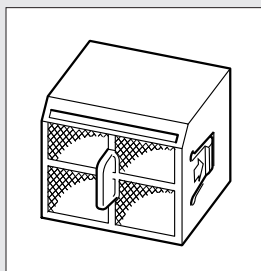

別売品の購入方法

●直接、購入される場合

弊社商品の取扱店でお求めください。

●宅配サービスを利用される場合

INAXメンテナンスにご連絡ください。

宅配サービスにてお届けします。(宅配サービスの場合は送料が別途必要となります。)

[電話注文]

ご注文 ☎ 0120-00-1794

受付時間 9:00～17:00 (夏期・年末・年始の休みは除く)

[インターネット利用]

下記ホームページアドレスにアクセスして、商品をお求めください。

<http://inax.lixil.co.jp/aftersupport/> (24 時間受付)

(インターネットではお取り扱いしていない商品もございます。あらかじめご了承ください。)

商品のお問い合わせは
お客さま相談センターへ

TEL ☎ 0120-1794-00
FAX ☎ 0120-1794-30

受付時間 平日 9:00～18:00
土・日・祝日 9:00～17:00
(ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く)

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・IP電話などでは
ご利用にならない場合がございます。
下記番号をご利用ください。

TEL : 0562-40-4050
FAX : 0562-40-4053

修理のご依頼は
INAXメンテナンス修理受付センターへ

TEL ☎ 0120-1794-11
FAX ☎ 0120-1794-56

受付時間 9:00～20:00 (365日受付)

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。
個人情報の取り扱いについての詳細は、当社ホームページの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

年	月	日	損傷と処置	サービス担当者

株式会社 LIXIL

ホームページアドレス <http://www.lixil.co.jp/>